

USER INSTRUCTIONS

WIDEX MBR3D CHARGER

WPT202 model



GB
CZ
FI
GR
HU
LT
LV
NO
RU
SE

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

GB	USER INSTRUCTIONS	3
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	21
FI	KÄYTTÖOHJE	39
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	57
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	75
LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	93
LV	LIETOTĀJA INSTRUKCIJA	111
NO	BRUKSANVISNING	128
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	146
SE	BRUKSANVISNING	165
	FCC AND ISED STATEMENTS	183

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read these pages carefully before you start using your charger.



Keep the charger and other small parts away from children, pets, and mentally disabled people.



Never expose the charger to temperatures above 50° C (122° F), to prolonged sunlight, open flames or ignition sources.



Place the charger upright on a flat, stable surface when charging and with adequate space around the charger. Do not cover or place near flammable substances.



Never try to open or repair the charger yourself. Contact your hearing care professional if you experience defects.



Use only a WPT202 charger with your hearing aids. Use of a charger not recommended by WSAUD A/S may compromise the system or result in dangerous situations.



Never leave the charger in direct sunlight and do not immerse it in water.



Never insert other objects than your hearing aids in the charging wells.



The power adapter must comply with IEC 60601-1, IEC 62368-1 or equivalent safety standards acceptable in your region. Always use the supplied USB cable with a power adapter with a USB-A type socket.

YOUR CHARGER

Welcome

Thank you for choosing this product, which is intended to charge the supported hearing aid(s).


Read these instructions carefully before you start using this device.

NOTE

Your charger may not look exactly like the one illustrated in this booklet. We reserve the right to make any changes we consider necessary.

The charger at a glance

The charger has a charging well for each hearing aid, and two light indicators that show the charging status of the hearing aids.

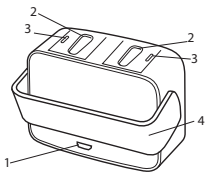

1. Micro USB port
2. Charging wells
3. Light indicators
4. Hinged cover

Operating, storage and transport conditions

Your charger is designed for indoor use. It is sensitive to extreme conditions such as high temperatures, and it should not be operated, stored or transported in direct sunlight.

Operate the charger within the following conditions:

	Minimum	Maximum
Temperature	0°C (32°F)	30°C (86°F)
Humidity	10% rH	95% rH

Store and transport the charger within the following conditions:


	Minimum	Maximum
Temperature	-20°C (-4°F)	50°C (122°F)
Humidity	10% rH	95% rH
Atmospheric pressure	750 mbar	1060 mbar

You can find technical data sheets and additional information on your charger on <https://global.widex.com>.


OPERATING THE CHARGER

Getting ready for use


The cover

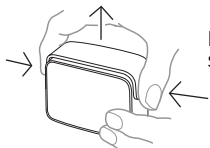

Before use, grab the hinged cover on both sides and lift it upwards.

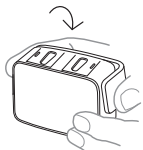


Then pull it over towards the side with the USB port.

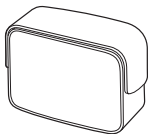


When you are not using the charger, close the hinged cover to protect the charging wells. Simply pull the hinged cover upwards to cover the top before pressing it down.

Power supply


You can connect your charger to different power supplies with 5V DC, 500 mA output:

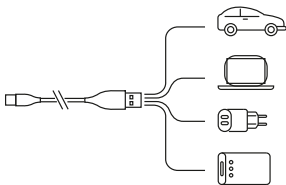

Use only the included USB cable.

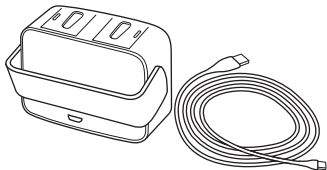

Connect the cable to the charger:

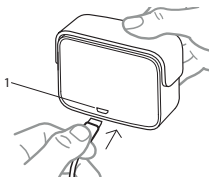

1. Micro USB port

Power on


When the charger is connected to the power supply, the light indicators **flash white 5 times** and then turn off:



The charger is now in standby mode and ready to charge your hearing aid.

Charging the hearing aid

Gently place your hearing aid in the charging well. The hearing aid turns off automatically.

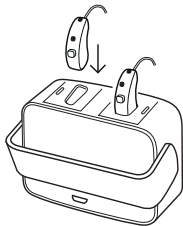

When connected to power, the charger can charge two hearing aids simultaneously; however, each hearing aid can be charged individually, depending on the state of the hearing aid.


This means that if one hearing aid is fully charged and placed in the charger, it will not charge.

However, if the other hearing aid is *not* charged, it will charge.

Charging your hearing aid fully will take approximately 4 hours. If you charge your hearing aid for half an hour, you will have approximately 4 hours of use.


Charging indicators

While the charger is detecting the hearing aid, the light indicator turns **solid yellow**:

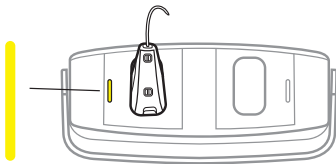


Once the charger has detected the hearing aid, the charging will begin.


The light indicator will **flash green** to indicate that the hearing aid is low on battery and less than **40% charged**:

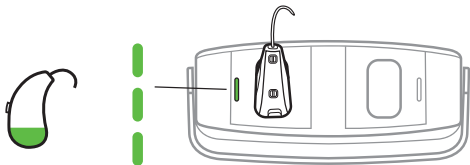

The light indicator will **glow green** to indicate that the hearing aid is more than **40% charged**:

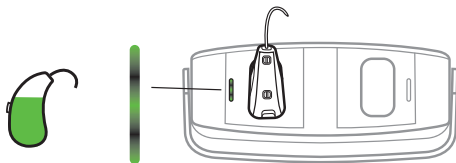

The light indicator will **turn solid green** to indicate that the hearing aid is **100% charged**:

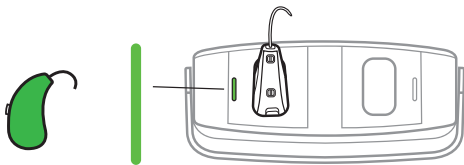

After charging

Avoid removing the hearing aids from the charging wells by pulling the ear wire/tube, as this could damage the connection to the hearing aid.

Instead, put your fingers round the hearing aid when removing it from the charger.

When you remove the hearing aid from the charger, the hearing aid turns on after a few seconds.

Remember to turn it off if you are not going to use it right away.

Immediately after charging, the hearing aid may temporarily feel warm.


If you are not comfortable with this, wait a few minutes, for the hearing aid to reach room temperature, before putting the hearing aid on.

Overview of light indicators

Light indicators

Status

Flashing white

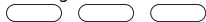

The charger is connected to power

Solid yellow



The charger is detecting the hearing aid

Flashing green



The hearing aid is charging
Low battery, less than 40%

Glowing green



The hearing aid is charging
Battery more than 40%

Solid green



The hearing aid is fully charged
Battery 100% charged

Light indicators**Status**

One indicator flashing red



An error occurred during charging and the charging has stopped
See Troubleshooting

Both indicators flashing red



An error occurred during charging and the charging has stopped
See Troubleshooting

Flashing yellow



The temperature of the hearing aid has become too high during charging and charging is paused
See Troubleshooting

CLEANING

The charger does not generally require cleaning. If necessary, carefully wipe off the charger with a soft dry cloth.

If you notice any dust in the charging well, gently blow it clean. If this is not enough, gently clean the charging well with a cotton bud.



To remove earwax from the charger, carefully wipe with a soft cloth with a bit of mild household detergent.




Never use sharp/pointy objects to clean the charger.

TROUBLESHOOTING

These pages contain advice on what to do if your charger does not work as expected.

Light indicators	Possible cause	Solution
No lights	The charger is not connected	Make sure that the USB cable is connected to a power adapter and then plugged into a wall socket
	The hearing aid is not placed correctly in the charger	Place the hearing aid correctly in the charger
One or both indicators flashing yellow 	The temperature of your surroundings or of the hearing aid exceeds a critical limit and the charging is paused	The charging will continue when the temperature of your surroundings or the hearing aid has dropped. If this happens continually, find a cooler place to charge your hearing aid
One indicator flashing red 	The charger cannot recognise the hearing aid	Remove the incompatible hearing aid

Light indicators	Possible cause	Solution
	The hearing aid has a critical error	Remove the hearing aid, disconnect from the power for 10 seconds and then try again If the charger is still flashing red, contact your hearing care professional
Both indicators flashing red 	The charger has a critical error	Remove the hearing aid, disconnect from the power for 10 seconds and then try again If the charger is still flashing red, contact your hearing care professional

REGULATORY INFORMATION

Intended use

The WPT202 model is to be used for charging the supported hearing aid(s).

EU directives

Directive 2014/53/EU

Hereby, WSAUD A/S declares that the WPT202 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The WPT202 contains a radio transmitter operating at: 6.78 MHz, 13.4 dB μ A/m @ 3 m.

A copy of the Declaration of Conformity according to 2014/53/EU can be found at

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Information regarding disposal






Do not dispose of hearing aids, hearing aid accessories and chargers with ordinary household waste.





Hearing aids, hearing aid accessories and chargers should be disposed of at sites intended for electrical waste and electronic equipment, or given to your hearing care professional for safe disposal.

For returning or shipping the devices, please contact your hearing care professional.

SYMBOLS

Symbols commonly used by WSAUD A/S in medical device labelling (labels/IFU/etc.)

Symbol	Title/Description
	Manufacturer The product is produced by the manufacturer whose name and address are stated next to the symbol. If appropriate, the date of manufacture may also be stated.
	Catalogue number The product's catalogue (item) number.
	Consult instructions for use The user instructions contain important cautionary information (warnings/precautions) and must be read before using the product.
	Warning Text marked with a warning symbol must be read before using the product.
	WEEE mark "Not for general waste". When a product is to be discarded, it must be sent to a designated collection point for recycling and recovering to prevent the risk of harm to the environment or human health as a result of the presence of hazardous substances.

Symbol	Title/Description
	CE mark The product is in conformity with the requirements set out in European CE marking directives.
	RCM mark The product complies with electrical safety, EMC and radio spectrum regulatory requirements for products supplied to the Australian or New Zealand markets.
	FCC logo The product is compliant with relevant USA 47 CFR Rules. FCC – Federal Communications Commission.
	Medical device Indication that the device is a medical device.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než začnete nabíječku používat, důkladně si přečtěte tento návod.



Nabíječku a ostatní malé části udržujte mimo dosah dětí, domácích zvířat a mentálně postižených osob.



Nabíječku nikdy nevystavujte teplotám nad 50 °C (122 °F), delšímu slunečnímu záření, otevřenému plameni nebo zápalným zdrojům.



Při nabíjení postavte nabíječku na rovnou a stabilní plochu a nechejte kolem ní dostatečný prostor. Nabíječku nezakrývejte a neumísťujte ji do blízkosti hořlavých látek.



Nikdy se nesnažte nabíječku sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se vyskytnou vady, obraťte se na foniatra.



Pro sluchadla používejte pouze nabíječku WPT202. Použití nabíječky, která není doporučena společností WSAUD A/S, může poškodit systém nebo způsobit nebezpečné situace.



Nikdy nenechávejte nabíječku na přímém slunečním světle a neponořujte ji do vody.



Do nabíjecích slotů nikdy nevkládejte jiné předměty než sluchadla.



Napájecí adaptér musí splňovat normu IEC 60601-1, IEC 62368-1 nebo ekvivalentní bezpečnostní normy přijatelné pro vaši oblast. Vždy použijte dodaný USB kabel s napájecím adaptérem s konektorem USB-A.

VAŠE NABÍJEČKA

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento produkt, který je určen k nabíjení podporovaných sluchadel.


Než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny.

POZNÁMKA

Vaše nabíječka nemusí vypadat přesně jako ta, která je znázorněna v tomto návodu. Vyhradujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

První pohled na nabíječku

Nabíječka má slot pro každé sluchadlo a dva světelné indikátory, které ukazují stav nabíjení sluchadel.

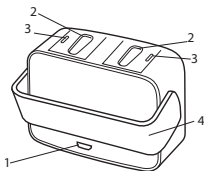

1. Port mikro USB
2. Nabíjecí sloty
3. Světelné indikátory
4. Sklopný kryt

Provozní, skladovací a přepravní podmínky

Nabíječka je určena pro použití v interiéru. Je citlivá na extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty, a neměla by být provozována, skladována ani přepravována na přímém slunci.

Nabíječku provozujte za těchto podmínek:

	Minimální	Maximální
Teplota	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Vlhkost	10 % (relativní)	95 % (relativní)

Nabíječku skladujte a přepravujte za těchto podmínek:


	Minimální	Maximální
Teplota	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Vlhkost	10 % (relativní)	95 % (relativní)
Atmosférický tlak	750 mbar	1060 mbar

Technické specifikace a další informace o nabíječce naleznete na stránkách <https://global.widex.com>.


PROVOZ NABÍJEČKY

Příprava k používání


Kryt

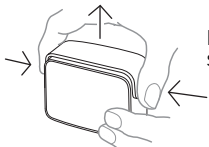

Před použitím uchopte sklopný kryt na obou stranách a zvedněte jej směrem nahoru.

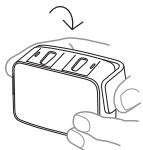


Pak jej zatáhněte směrem k boku s portem USB.

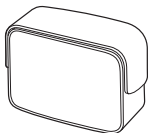


Pokud nabíječku nepoužíváte, zavřete sklopný kryt abyste ochránili nabíjecí sloty. Jednoduše zatáhněte sklopný kryt směrem nahoru, abyste před jeho stisknutím zakryli horní okraj.

Napájení


Nabíječku můžete připojit k různým zdrojům napájení s hodnotami 5V DC, 500 mA výstup:

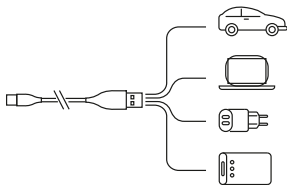

Používejte pouze kabel USB, který byl přibalen.

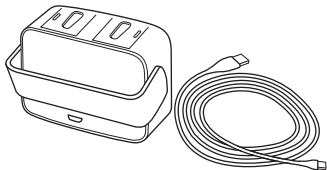

Připojte kabel k nabíječce:

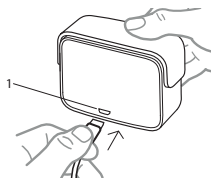

1. Port mikro USB

Zapnutí


Když je nabíječka připojena ke zdroji napájení, světelné indikátory **bliknou 5krát** a pak zhasnou:



Nabíječka je nyní v pohotovostním režimu a je připravena k nabíjení sluchadel.

Nabíjení sluchadel

Jemně umístíte sluchadlo do nabíjecího slotu. Sluchadlo se automaticky vypne.

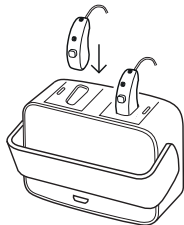

Je-li nabíječka připojena k napájení, může nabíjet dvě sluchadla současně. Každé sluchadlo však může být nabíjeno individuálně v závislosti na svém stavu.


To znamená, že pokud je jedno sluchadlo plně nabitě a umístíte je do nabíječky, nebude se nabíjet.

Pokud ale druhé sluchadlo nabitě *není*, bude se nabíjet.

Nabíjení sluchadla bude trvat přibližně 4 hodiny. Pokud si budete nabíjet sluchadla po dobu půl hodiny, vystačí vám přibližně na 4 hodiny používání.


Indikátory nabíjení

Zatímco nabíječka zjišťuje přítomnost sluchadla, kontrolka se rozsvítí **jasně žlutou barvou**:

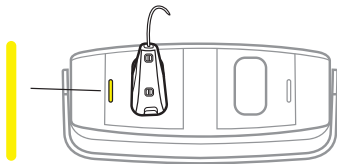


Jakmile nabíječka detekuje sluchadla, začnou se nabíjet.


Světelný indikátor **bliká zeleně**, pokud má sluchadlo slabou baterii a je nabito **méně než na 40 %**:

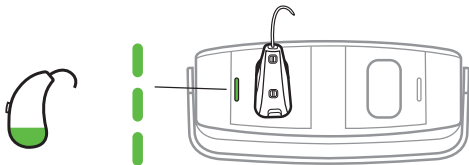

Světelný indikátor **svítí světle zeleně**, pokud je sluchadlo nabito **na více než 40 %**:

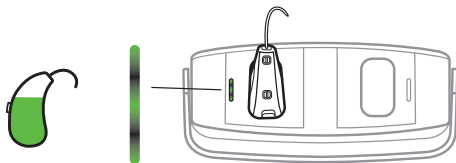

Světelný indikátor se rozsvítí **jasně zelenou barvou**, když je sluchadlo nabito na **100 %**:

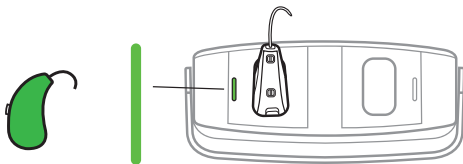

Po nabití

Při vyjímání sluchadel z nabíjecích slotů netahejte za sluchové kabely, protože by se mohlo poškodit spojení mezi kabelem a sluchadlem.

Místo toho při vyjímání z nabíječky položte prsty okolo sluchadla.

Po vyjmutí z nabíječky se sluchadlo po několika vteřinách zapne.

Pokud je nechcete ihned používat, nezapomeňte je vypnout.

Immediately po nabití může být sluchadlo dočasně zahřáté.

Pokud je vám to nepříjemné, vyčkejte několik minut, než sluchadlo dosáhne pokojové teploty. Teprve potom si je nasadte.

Přehled světelných indikátorů

Světelné indikátory

Stav

Blikající bílá



Nabíječka je připojena k napájení.

Jasně žlutá



Nabíječka detekuje sluchadlo.

Blikající zelená



Sluchadlo se nabíjí.
Nízký stav nabití, méně než 40 %.

Světle zelená



Sluchadlo se nabíjí.
Stav nabití více než 40 %.

Jasně zelená



Sluchadlo je plně nabité.
Stav nabití je 100 %.

Jeden indikátor bliká červeně



Při nabíjení došlo k chybě a nabíjení se zastavilo.
Viz Řešení potíží.

Světelné indikátory

Stav

Oba indikátory blikají červeně



Při nabíjení došlo k chybě a nabíjení se zastavilo.
Viz Řešení potíží.

Blikající žlutá



Během nabíjení se teplota sluchadla dostala příliš vysoko a nabíjení je pozastaveno.
Viz Řešení potíží.

ČIŠTĚNÍ

Nabíječka obvykle nevyžaduje čištění. V případě potřeby nabíječku opatrně otřete měkkým suchým hadříkem.

Pokud si všimnete prachu v nabíjecím slotu, jemně jej odfoukněte. Pokud to nestačí, jemně očistěte nabíjecí slot bavlněným tampónem.



Pokud na nabíječce ulpí ušní maz, opatrně jej otřete měkkou tkaninou s jemným saponátem.




K čištění nabíječky nikdy nepoužívejte ostré a špičaté předměty.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tyto stránky obsahují doporučení, co dělat, pokud nabíječka nepracuje očekávaným způsobem.

Světelné indikátory	Možná příčina	Řešení
Indikátory nesvítí.	Nabíječka není připojena.	Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k napájecímu adaptéru a poté zapojen do síťové zásuvky.
	Sluchadlo není v nabíječce správně umístěno.	Umístěte sluchadlo správně do nabíječky.
Jeden nebo oba světelné indikátoryblikají žlutě. 	Teplota okolí nebo sluchadla překračuje kritickou mez a nabíjení je pozastaveno.	Nabíjení bude pokračovat, až teplota vašeho okolí nebo sluchadla klesne. Pokud k tomu dochází neustále, najděte chladnější místo, kde si můžete sluchadla nabíjet.
Jeden indikátor bliká červeně 	Nabíječka nemůže rozpoznat sluchadlo.	Odstraňte nekompatibilní sluchadlo.

Světelné indikátory	Možná příčina	Řešení
	U sluchadla se vyskytla kritická chyba.	Odstraňte sluchadlo, odpojte napájení po dobu 10 sekund a poté akci opakujte. Pokud nabíječka stále blikáčerveně, obraťte se na odborníka na sluchadla.
Oba indikátory blikáčerveně. 	Došlo ke kritické chybě nabíječky.	Odstraňte sluchadlo, odpojte napájení po dobu 10 sekund a poté akci opakujte. Pokud nabíječka stále bliká červeně, obraťte se na odborníka na sluchadla.

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Zamýšlené použití

Model WPT202 je určen k nabíjení podporovaných sluchadel.

Směrnice EU

Směrnice 2014/53/EU

Společnost WSAUD A/S tímto prohlašuje, že výrobek WPT202 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Výrobek WPT202 obsahuje rádiový vysílač pracující při: 6,78 MHz, 13,4 dB μ A/m při 3 m.

Kopie dokumentu „Prohlášení o shodě“ podle směrnice 2014/53/EU je dostupná na adrese:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Informace týkající se likvidace






Sluchadla, příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.





Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit prodejci sluchadel za účelem bezpečné likvidace.

Informace o vrácení nebo odeslání zařízení získáte od svého odborníka na sluchadla.

SYMBOLY

Symboly používané WSAUD A/S při označování zdravotnických prostředků (štítky, návody k použití apod.)

Symbol	Název/Popis
	Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.
	Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
	Přečtěte si návod k použití Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
	Varování Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.
	Značka WEEE „Nevyhadzovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.

Symbol	Název/Popis
	Značka CE Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.
	Značka RCM Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
	Logo FCC Výrobek je v souladu s příslušnými pravidly USA 47 CFR. Komise FCC (Federal Communications Commission)
	Zdravotnický prostředek Vyjádření, že se jedná o zdravotnické zařízení.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

Lue nämä sivut huolellisesti, ennen kuin aloitat laturin käyttämisen.



Pidä laturi ja muut pienet osat pois lasten, lemmikeiden ja henkisesti kehitysvammaisten henkilöiden ulottumattomissa.



Älä koskaan altista laturia lämpötiloille, jotka ovat yli 50 ° C (122 ° F), pitkittyneelle auringonvalolle, avotullelle tai syttymisen lähteille.



Aseta laturi pystyasentoon tasaiselle, tukevalle alustalle latauksen aikana niin, että laturin ympärillä on riittävästi tilaa. Älä peitä tai sijoita syttyvien aineiden lähelle.



Älä koskaan yritä avata tai korjata laturia itse. Jos kohtaat vikoja, ota yhteyttä kuulokojeen hankintapaikkaan.



Käytä vain WPT202-laturia kuulokojeidesi kanssa. Ei ole suositeltavaa käyttää laturia, jota WSAUD A/S ei suosittele, sillä se saattaa vaarantaa järjestelmän tai johtaa vaarallisiin tilanteisiin.



Älä koskaan jätä laturia suoraan auringonvaloon äläkä upota sitä veteen.



Älä koskaan aseta latauskouruihin muita esineitä kuin kuulokojeitasi.



Muuntajan on täytettävä IEC 60601-1, IEC 62368-1 tai vastaavat turvallisuusstandardit, jotka ovat hyväksyttäviä alueellasi. Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia aina muuntajan kanssa, jossa on USB-A-tyyppinen pistoke.

LATURISI

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen joka on tarkoitettu tuettujen kuulokojeen(-kojeiden) lataamiseen.


Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin aloitat laitteen käyttämisen.

HUOMAA

Laturi ei ehkä näytä täsmälleen samalta kuin tässä kirjasessa kuvattu. Pidämme oikeuden tehdä muutoksia, joita pidämme tarpeellisina.

Laturi yhdellä silmäyksellä

Laturissa on latauskaukalo kummallekin kuulokojeelle ja kaksi merkkivaloa, jotka näyttävät kuulokojeiden latauksen tilan.

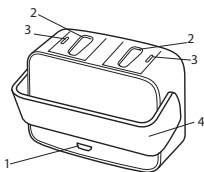

1. Micro USB-portti
2. Latauskaukalot
3. Merkkivalot
4. Saranoitu kansi

Käyttö-, varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Laturi on suunniteltu sisäkäyttöön. Se on herkkä ääriolosuhteille, kuten korkeat lämpötilat, eikä sitä saa käyttää, varastoida tai kuljettaa suorassa auringonvalossa.

Käytä laturia seuraavissa olosuhteissa:

	Min.	Maks.
Lämpötila	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Kosteus	10 % rH	95 % rH

Säilytä ja kuljeta laturi seuraavissa olosuhteissa:


	Min.	Maks.
Lämpötila	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Kosteus	10 % rH	95 % rH
Ilmanpaine	750 mbar	1060 mbar

Laturisi tekniset tiedot ja lisätietoja linkistä <https://global.widex.com>.


LATURIN KÄYTTÖ

Käytön valmistelu


Kansi

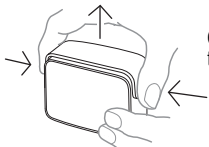

Ota kiinni saranoidusta kannesta ennen käyttöä molemmin puolin ja nosta sitä ylöspäin.

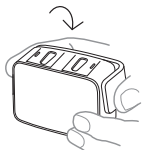


Vedä se sitten sivuun kohti USB-porttia.

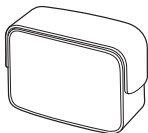


Kun et käytä laturia, sulje kannesta ennen käyttöä suojataksesi latauskaukaloita. Yksinkertaisesti vedä kannesta ennen käyttöä ylöspäin, ennen kuin painat sitä alaspäin.

Virtalähde


Voit kytkeä laturin eri virta lähteisiin joissa on 5V DC, 500 mA lähtö:

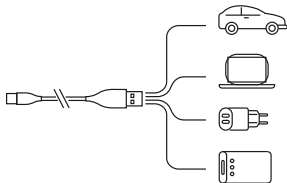

Käytä vain mukana olevaa USB-kaapelia.

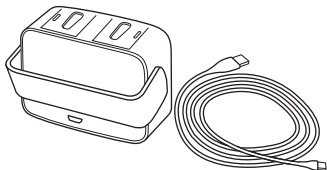

Kytke kaapeli laturiin:

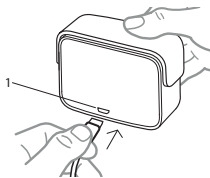

1. Micro USB-portti

Virran kytkeminen päälle


Kun laturi on kytketty virtalähteeseen, merkkivalot **vilkkuvat valkoisina 5 kertaa** ja sammuvat sitten:



Laturi on nyt valmiustilassa ja valmiina lataamaan kuulokojeesi.

Kuulokojeen lataaminen

Aseta kuulokoje varovasti latauskaukaloon. Kuulokoje sammuu automaattisesti.

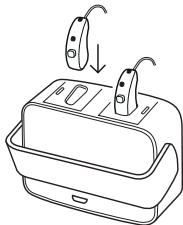

Kun laite on kytketty virtalähteeseen, laturi voi ladata kahta kuulokojetta samanaikaisesti. Jokainen kuulokoje voidaan kuitenkin ladata erikseen kuulokojeiden tilasta riippuen.


Tämä tarkoittaa sitä, että jos yksi kuulokoje on ladattu täyteen ja asetettu laturiin, se ei lataudu.

Jos toinen kuulokoje *ei* kuitenkaan ole ladattu, se latautuu.

Kuulokojeiden lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia. Jos lataat kuulokojettasi puoli tuntia, käyttöaika on noin 4 tuntia.


Latauksen indikaattorit

Kun laturi havaitsee kuulokojeen, merkkivalo muuttuu **tasaisen keltaiseksi**:

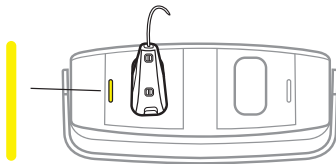


Kun laturi on havainnut kuulokojeet, lataus alkaa.


Merkkivalo **vilkkuu vihreänä** osoittaen, että kuulokojeen akku on lähes tyhjä ja sen lataus on alle **40 %**:

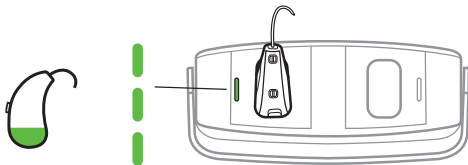

Merkkivalo **hehkuu vihreänä** osoittaen, että kuulokojeen lataus on yli **40 %**:

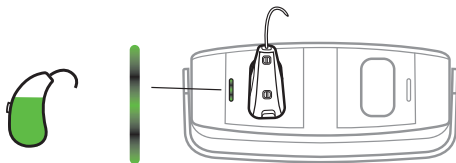

Merkkivalo **muuttuu tasaisen vihreäksi** osoittaen, että kuulokoje on **ladattu täyteen**:

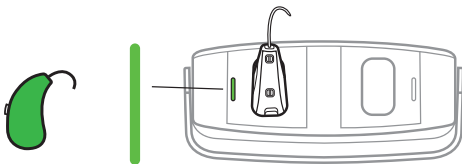

Latauksen jälkeen

Vältä kuulokojeiden irrottamista latauskaukaloista vetämällä korvajoh-toa/-putkea, sillä se voi vahingoittaa yhteyttä kuulokojeeseen.






Laita sen sijaan sormesi kuulokojeen ympärille poistaessasi sitä laturista. Kun poistat kuulokojeet laturista, kuulokoje käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.

Muista sammuttaa se, jos et aio käyttää sitä heti.

Heti latauksen jälkeen kuulokoje voi tilapäisesti tuntua lämpimältä.

Jos et pidä siitä, odota muutama minuutti, jotta kuulokoje saavuttaa huoneenlämpötilan ennen sen kytkemistä päälle.

Merkkivalojen yleiskuvaus

Merkkivalot	Tila
Vilkkuva valkoinen 	Laturi on kytketty virtalähteeseen
Tasainen keltainen 	Laturi etsii kuulokojetta
Vilkkuva vihreä 	Kuulokoje latautuu Vähäinen akku, alle 40 %
Hohtava vihreä 	Kuulokoje latautuu Akkua yli 40 %
Tasainen vihreä 	Kuulokoje on ladattu täyteen Akku 100 % ladattu

Merkkivalot**Tila**

Yksi merkkivalo vilkkuu punaisena



Latauksen aikana ilmeni virhe ja lataus on pysähtynyt
Katso Vianmääritys

Molemmat merkkivalot vilkkuvat punaisina



Latauksen aikana ilmeni virhe ja lataus on pysähtynyt
Katso Vianmääritys

Vilkkuva keltainen



Kuulokojeiden lämpötila on noussut latauksen aikana liian korkeaksi ja lataaminen on keskeytetty
Katso Vianmääritys

PUHDISTUS

Laturi ei yleensä vaadi puhdistusta. Pyyhi laturi tarvittaessa varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.

Jos havaitset pölyä latauskaukalossa, puhalla se varovasti puhtaaksi. Jos tämä ei riitä, puhdista latauskaukalo varovasti pumpulipuikolla.



Poista korvavaha laturista varovasti pyyhkimällä pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa kodin pesuainetta.




Älä koskaan puhdista laturia terävillä/kapeakärkisillä esineillä.

VIANMÄÄRITYS

Nämä sivut sisältävät neuvoja mitä tehdä, jos laturi ei toimi odotetulla tavalla.

Merkkivalot	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei valoja	Laturi ei ole yhdistetty	Varmista, että USB-kaapeli on kytketty virtalähteeseen ja se on kytketty pistorasiaan.
	Kuulokoje ei ole asetettu laturiin oikein	Aseta kuulokoje laturiin oikein
Yksi tai molemmat merkkivalot vilkkuvat keltaisena 	Ympäristön tai kuulokojeen lämpötila ylittää kriittisen rajan ja lataus on pysäytetty	Lataus jatkuu, kun ympäristön tai kuulokojeiden lämpötila on laskenut. Jos näin tapahtuu jatkuvasti, etsi viileämpi paikka kuulokojeesi lataukseen
Yksi merkkivalo vilkkuu punaisena 	Laturi ei pysty tunnistamaan kuulokojeita	Yhteensopimattoman kuulokojeen poistaminen

Merkkivalot	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Kuulokojeessa on vakava virhe	Poista kuulokoje, katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja yritä sitten uudelleen. Jos laturi edelleen vilkuttaa punaista valoa, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan
Molemmat merkkivalot vilkuttaa punaisena 	Laturissa on vakava virhe	Poista kuulokoje, katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja yritä sitten uudelleen. Jos laturi edelleen vilkuttaa punaista valoa, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan

LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT

Käyttötarkoitus

WPT202-mallia käytetään lataamaan tuettuja kuulokojeita.

EU-direktiivit

Direktiivi 2014/53/EU

WSAUD A/SVakuuttaa täten, että tämä WPT202-laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja laitetta koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

WPT202 sisältää radiolähtimen, joka toimii taajuudella: 6,78 MHz, 13,4 dB μ A/m @ 3 m.

Direktiivin 2014/53/EU mukainen vaatimustenmukaisuustodistus on nähtävissä seuraavassa osoitteessa:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Hävittämishjeet

Älä hävitä kuulokojeita, kuulokojeiden lisävarusteita ja latureita tavallisen talousjätteen mukana.

Kuulokojeet, kuulokojetarvikkeet ja laturit on hävitettävä sähköjätteille ja elektronisille laitteille tarkoitetuilla paikoilla, tai ne on annettava kuulonhuollon ammattilaiselle turvallista hävittämistä varten.

Ota yhteys kuulokojeiden hankintapaikkaan laitteiden lähetystä tai palautusta varten.

MERKINNÄT

Tavallisimmin käytetyt symbolit WSAUD A/S lääkinnällisten laitteiden merkittämisessä (tarrat/käyttöohjeet/jne.)

Symboli

Otsikko/kuvaus



Valmistaja

Tuotteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite mainitaan symbolin vieressä. Tarvittaessa myös valmistuspäivä saatetaan mainita.



Luettelonumero

Tuotteen luettelo (tuote-) numero.



Tutustu käyttöohjeisiin

Käyttöohje sisältää tärkeitä varoitustietoja (varoitukset/varoitomet) ja ne on luettava ennen laitteen käyttöönottoa.



Varoitus

Varoitusymbolilla merkitty teksti on luettava ennen tuotteen käyttöä.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun merkintä

”Ei sekajätteeseen”. Kun tuote on hävitettävä, se on lähetettävä merkittyyin keräyspisteeseen kierrätystä ja uudelleenhyödyntämistä varten, jotta ympäristölle tai ihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa vaarallisten aineiden takia.



CE-merkintä

Tuote täyttää EU:n CE-merkintädirektiivien vaatimukset.

Symboli**Otsikko/kuvaus**

**RCM-merkintä**

Tuote täyttää Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille toimitettaville laitteille asetetut sähköturvallisuuden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä radiotaajuuksien sääntelyvaatimukset.

**FCC-logo**

Tuote on asiaankuuluvien USA 47 CFR-sääntöjen mukainen.
FCC - Yhdysvaltain liittovaltion komission lausuma.

**Lääkinnällinen laite**

Merkki siitä, että laite on lääkitäminen laite.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σελίδες πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή σας.



Κρατήστε το φορτιστή και άλλα μικρά μέρη μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και άτομα με νοητική υστέρηση.



Ποτέ μην εκθέτετε το φορτιστή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C (122 °F), σε παρατεταμένο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.



Τοποθετήστε το φορτιστή σε όρθια θέση σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη φόρτιση και με επαρκή χώρο γύρω από το φορτιστή. Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε κοντά σε εύφλεκτες ουσίες.



Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να επιδιορθώσετε το φορτιστή μόνοι σας. Εάν εντοπίσετε ελαττώματα, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακοής.



Χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστή WPT202 με τα βοηθήματα ακοής σας. Η χρήση φορτιστή που δεν συνιστάται από την WSAUD A/S μπορεί να υποβαθμίσει το σύστημα ή να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.



Ποτέ μην αφήνετε τον φορτιστή στο άμεσο ηλιακό φως και μην τον βυθίζετε σε νερό.



Μην τοποθετείτε ποτέ άλλα αντικείμενα από τα βοηθήματα ακοής στις υποδοχές φόρτισης.



Το τροφοδοτικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60601-1, IEC 62368-1 ή ισοδύναμα πρότυπα ασφαλείας που είναι αποδεκτά στην περιοχή σας. Χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο καλώδιο USB με ένα τροφοδοτικό με υποδοχή τύπου USB-A.

Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΑΣ

Καλώς ήλθατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του υποστηριζόμενου βοηθήματος/-ων ακοής.


Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο φορτιστής σας μπορεί να μην μοιάζει ακριβώς με αυτόν που απεικονίζεται σε αυτό το φυλλάδιο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές που θεωρούμε απαραίτητες.

Ο φορτιστής με μια ματιά

Ο φορτιστής διαθέτει μια υποδοχή φόρτισης για κάθε βοήθημα ακοής και δύο ενδεικτικές λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης των βοηθημάτων ακοής.

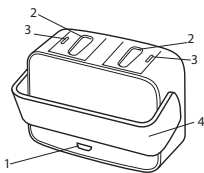

1. Θύρα micro USB
2. Υποδοχές φόρτισης
3. Ενδεικτικές λυχνίες
4. Αρθρωτό κάλυμμα

Συνθήκες λειτουργίας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Ο φορτιστής σας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Είναι ευαίσθητο σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, και δεν πρέπει να λειτουργεί, να αποθηκεύεται ή να μεταφέρεται σε άμεσο ηλιακό φως.

Χειριστείτε το φορτιστή εντός των ακόλουθων συνθηκών:

	Ελάχιστες	Μέγιστες
Θερμοκρασία	0 °C (32°F)	30 °C (86 °F)
Υγρασία	10% rH	95% rH

Φυλάσσετε και μεταφέρετε το φορτιστή εντός των ακόλουθων συνθηκών:


	Ελάχιστες	Μέγιστες
Θερμοκρασία	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Υγρασία	10% rH	95% rH
Ατμοσφαιρική πίεση	750 mbar	1060 mbar

Μπορείτε να βρείτε τα φύλλα τεχνικών δεδομένων και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το φορτιστή στη διεύθυνση <https://global.widex.com>.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Προετοιμασία για χρήση


Το κάλυμμα

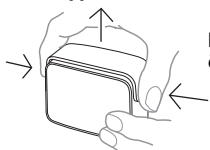

Πριν τη χρήση, πιάστε το αρθρωτό κάλυμμα από τις δύο πλευρές και σηκώστε το προς τα πάνω.

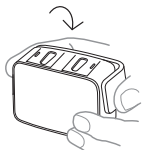


Στη συνέχεια, τραβήξτε το προς την πλευρά με τη θύρα USB.

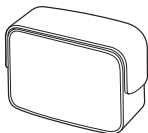


Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, κλείστε το αρθρωτό κάλυμμα για την προστασία των υποδοχών φόρτισης. Απλά τραβήξτε το αρθρωτό κάλυμμα προς τα πάνω για να καλύψετε την κορυφή πριν το πιέσετε.

Τροφοδοτικό


Μπορείτε να συνδέσετε το φορτιστή σας σε διαφορετικά τροφοδοτικά με έξοδο 5V DC, 500 mA:

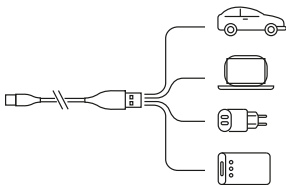

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB.

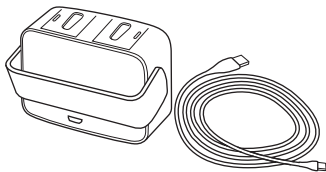

Συνδέστε το καλώδιο USB στο φορτιστή:

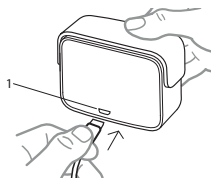

1. Θύρα micro USB

Ενεργοποίηση


Μόλις ο φορτιστής συνδεθεί στο τροφοδοτικό, οι ενδεικτικές λυχνίες **αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα 5 φορές** και, στη συνέχεια, απενεργοποιούνται:



Ο φορτιστής βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμος για τη φόρτιση του βοηθήματος ακοής.

Φόρτιση του βοηθήματος ακοής

Τοποθετήστε απαλά το βοήθημα ακοής στην υποδοχή φόρτισης. Το βοήθημα ακοής απενεργοποιείται αυτόματα.

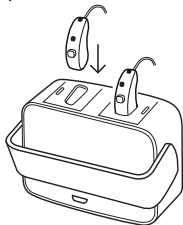

Όταν συνδέεται στην παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει δύο βοηθήματα ακοής ταυτόχρονα. Ωστόσο, κάθε βοήθημα ακοής μπορεί να φορτιστεί ανεξάρτητα, ανάλογα με την κατάσταση του βοηθήματος ακοής.


Αυτό σημαίνει ότι αν ένα βοήθημα ακοής φορτιστεί πλήρως και τοποθετηθεί στο φορτιστή, δεν θα φορτιστεί.

Ωστόσο, εάν το άλλο βοήθημα ακοής δεν είναι φορτισμένο, θα φορτιστεί.

Η φόρτιση του βοηθήματος ακοής διαρκεί περίπου 4 ώρες. Εάν φορτίσετε το βοήθημα ακοής για το μισό χρόνο, θα έχετε περίπου 4 ώρες χρήσης.


Ενδείξεις φόρτισης

Ενώ ο φορτιστής ανιχνεύει το βοήθημα ακοής, η φωτεινή ένδειξη ανάβει με **σταθερό κίτρινο χρώμα**:

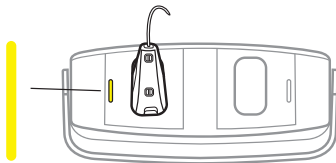


Μόλις ο φορτιστής ανιχνεύσει το βοήθημα ακοής, η φόρτιση θα ξεκινήσει.


Η ενδεικτική λυχνία θα **αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα** για να ότι το βοήθημα ακοής έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας και είναι λιγότερο από **40% φορτισμένο**:

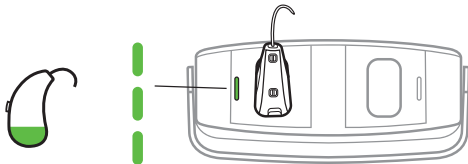

Η ενδεικτική λυχνία θα **ανάβει με έντονο πράσινο χρώμα** για να υποδείξει ότι το βοήθημα ακοής είναι περισσότερο από **40% φορτισμένο**:

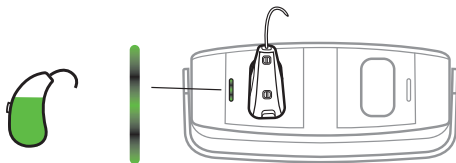

Η ενδεικτική λυχνία θα **εμφανίζει σταθερό πράσινο χρώμα** για να υποδείξει ότι το βοήθημα ακοής είναι **100% φορτισμένο**:

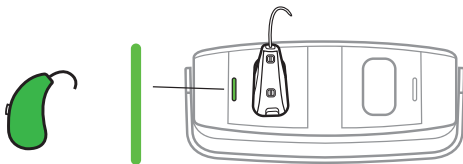

Μετά τη φόρτιση

Αποφεύγετε να αφαιρείτε τα βοηθήματα ακοής από τις υποδοχές φόρτισης τραβώντας το καλώδιο του αυτιού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σύνδεση και του βοηθήματος ακοής.

Αντίθετα, τοποθετήστε τα δάχτυλά σας γύρω από το βοήθημα ακοής κατά την αφαίρεσή του από τον φορτιστή.





Όταν αφαιρείτε το βοήθημα ακοής από το φορτιστή, το βοήθημα ακοής ενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Θυμηθείτε να το απενεργοποιήσετε, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε αμέσως.

Αμέσως μετά τη φόρτιση, το βοήθημα ακοής μπορεί να είναι προσωρινά θερμό.

Εάν δεν νιώθετε άνετα με αυτό, περιμένετε λίγα λεπτά, ώστε το βοήθημα ακοής να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου, προτού το φορέσετε.

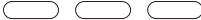Επισκόπηση των ενδεικτικών λυχνιών

Ενδεικτικές λυχνίες	Κατάσταση
Αναλαμπή με λευκό χρώμα 	Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος
Σταθερό κίτρινο χρώμα 	Ο φορτιστής ανιχνεύει το βοήθημα ακοής
Αναλαμπή με πράσινο χρώμα 	Το βοήθημα ακοής φορτίζει Χαμηλή στάθμη μπαταρίας, κάτω από 40%
Λαμπερό πράσινο χρώμα 	Το βοήθημα ακοής φορτίζει Στάθμη μπαταρίας πάνω από 40%

Ενδεικτικές λυχνίες

Κατάσταση

Σταθερό πράσινο χρώμα



Το βοήθημα ακοής είναι πλήρως φορτισμένο
Μπαταρία 100% φορτισμένη

Μια ένδειξη που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα



Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη φόρτιση και η φόρτιση διακόπηκε
Ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Και οι δύο ενδείξεις αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα



Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη φόρτιση και η φόρτιση διακόπηκε
Ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Αναλαμπή με κίτρινο χρώμα



Η θερμοκρασία του βοηθήματος ακοής έχει γίνει πολύ υψηλή κατά τη φόρτιση και η φόρτιση έχει διακοπεί
Ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Γενικά, ο φορτιστής δεν απαιτεί καθαρισμό. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε προσεκτικά το φορτιστή με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Αν παρατηρήσετε σκόνη στην υποδοχή φόρτισης, καθαρίστε απαλά με αέρα. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, καθαρίστε απαλά την υποδοχή φόρτισης με μια μπατονέτα.

Για να αφαιρέσετε την κυψελίδα από το φορτιστή, σκουπίστε προσεκτικά με ένα μαλακό πανί με λίγο ήπιο οικιακό απορρυπαντικό.




Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά/μυτερά αντικείμενα για να καθαρίσετε το φορτιστή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτές οι σελίδες περιέχουν συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε εάν ο φορτιστής σας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.

Ενδεικτικές λυχνίες	Πιθανή αιτία	Λύση
	Καμία ενδεικτική λυχνία	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος
	Το βοήθημα ακοής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σε ένα τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, ότι έχει συνδεθεί σε μια πρίζα τοίχου
	Μία ή και οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν με κίτρινο χρώμα	Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή του βοηθήματος ακοής υπερβαίνει ένα κρίσιμο όριο και η φόρτιση έχει διακοπεί
	Μια ένδειξη που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Η φόρτιση θα συνεχιστεί όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντός σας ή του βοηθήματος ακοής μειωθεί. Αν αυτό προκύπτει συνεχώς, βρείτε ένα πιο δροσερό μέρος για να φορτίσετε το βοήθημα ακοής σας
	Ο φορτιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει το βοήθημα ακοής	Αφαιρέστε το ασύμβατο βοήθημα ακοής

Ενδεικτικές λυχνίες	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το βοήθημα ακοής έχει εμφανίσει κρίσιμο σφάλμα	Αφαιρέστε το βοήθημα ακοής, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά Εάν ο φορτιστής συνεχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα ακοής
Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα 	Ο φορτιστής έχει εμφανίσει κρίσιμο σφάλμα	Αφαιρέστε το βοήθημα ακοής, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά Εάν ο φορτιστής συνεχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα ακοής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Προοριζόμενη χρήση

Το μοντέλο WPT202 προορίζεται για τη φόρτιση του υποστηριζόμενου βοηθήματος/-ων ακοής.

Οδηγίες ΕΕ

Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα, η WSAUD A/S δηλώνει ότι το WPT202 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Το WPT202 περιέχει έναν ραδιοπομπό που λειτουργεί στα: 6,78 MHz, 13,4 dBμΑ/μ @ 3 m.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την 2014/53/ΕΕ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη

Μην απορρίπτετε βοηθήματα ακοής, παρελκόμενα βοηθημάτων ακοής και φορτιστές με τα συνήθη οικιακά απόβλητα.

Τα βοηθήματα ακοής, τα παρελκόμενα βοηθημάτων ακοής και οι φορτιστές πρέπει να απορρίπτονται στους ειδικούς χώρους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ή να παραδίδονται στον ειδικό σε θέματα ακοής για ασφαλή απόρριψη.

Για την επιστροφή ή την αποστολή των συσκευών, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα ακοής.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά από την WSAUD A/S στη σήμανση ιατρικών συσκευών (ετικέτες/IFU/κτλ.)

Σύμβολο	Τίτλος/Περιγραφή
---------	------------------



Κατασκευαστής

Το προϊόν κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του οποίου το όνομα και η διεύθυνση αναφέρονται δίπλα από το σύμβολο. Εάν είναι απαραίτητο, η ημερομηνία κατασκευής μπορεί επίσης να αναφερθεί.



Αριθμός καταλόγου

Ο αριθμός καταλόγου του προϊόντος.



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες προφυλάξεων (προειδοποιήσεις/προφυλάξεις) και πρέπει οπωσδήποτε να τις διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.







Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε το κείμενο που είναι σημειωμένο με ένα σύμβολο προειδοποίησης.



Σήμανση WEEE

«Όχι για γενικά απόβλητα». Όταν πρέπει να απορρίψετε ένα προϊόν, πρέπει να σταλεί σε συγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων ως αποτέλεσμα παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

Σύμβολο	Τίτλος/Περιγραφή
	<p>Σήμανση CE</p> <p>Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στις Ευρωπαϊκές οδηγίες σήμανσης CE.</p>
	<p>Σήμανση RCM</p> <p>Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών περί ηλεκτρικής ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τα προϊόντα που διατίθενται στις αγορές της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας.</p>
	<p>Λογότυπο FCC</p> <p>Το προϊόν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες CFR 47 των ΗΠΑ. FCC – Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών.</p>
	<p>Ιατρική συσκευή</p> <p>Ένδειξη ότι η συσκευή είναι ιατρική συσκευή.</p>

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Mielőtt elkezdí használni a töltőt, olvassa át figyelmesen ezeket az oldalakat.



Tartsa távol a töltőt és a többi kis alkatrészt gyermekétől, háziállattól és szellemi fogyatékkal élő személyektől.



Soha ne tegye ki a töltőt 50 °C-nál (122 °F) magasabb hőmérsékletnek, hosszán tartó napfénynek, nyílt lángnak vagy gyújtóforrásnak.



Töltés közben állítsa a töltőt lapos, stabil felületre, és hagyjon körülötte elegendő helyet. Ne fedje le, és ne tegye gyúlékony anyagok közelébe.



Soha ne próbálja felnyitni vagy saját kezűleg megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén forduljon hallókészülék javításában jártas szakemberhez.



Kizárólag WPT202 töltőt használjon a hallókészülékeihez. Kizárólag a WSAUD A/S által javasolt töltőt használjon, különben veszélyeztetí a rendszer működését, és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.



Soha ne hagyja a töltőt közvetlen napfénynek kitéve, és ne merítse vízbe.



A töltő mélyedéseibe soha ne helyezzen be egyéb tárgyakat, csak a hallókészülékeket.



A hálózati adapternek kötelező megfelelnie az IEC 60601-1, IEC 62368-1 szabványoknak, illetve az Ön régiójában elfogadható, ezzel egyenértékű biztonsági szabványoknak. Mindig a mellékelt USB-kábelt használja, USB-A típusú csatlakozójazzal rendelkező tápadapterrel.

A TÖLTŐ

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta, amely a támogatott hallókészülék(ek) töltésére használható.


A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a töltő nem pontosan úgy néz ki, mint a kiadványban szereplő ábra. Fenntartjuk a jogot, hogy elvégezzük az általunk szükségesnek vélt változtatásokat.

A töltőről dióhéjban

A töltő külön töltőrekeszekkel rendelkezik az egyes hallókészülék számára, és két jelzőfény mutatja a hallókészülékek töltési állapotát.

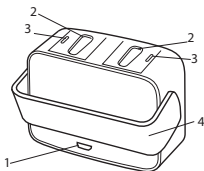

1. Mikro USB-port
2. Töltőrekeszek
3. Jelzőfények
4. Kihajtható fedél

Üzemeltetési, tárolási és szállítási feltételek

A töltőt beltéri használatra tervezték. Érzékeny a szélsőséges körülményekre, például a magas hőmérsékletre; nem szabad közvetlen napsütésnek kitéve üzemeltetni, tárolni vagy szállítani.

Az alábbi feltételek mellett üzemeltesse a töltőt:

	Minimális	Maximális
Hőmérséklet	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Páratartalom	10% rH	95% rH

Az alábbi feltételek mellett tárolja, illetve szállítsa a töltőt:


	Minimális	Maximális
Hőmérséklet	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Páratartalom	10% rH	95% rH
Légköri nyomás	750 mbar	1060 mbar

A töltőre vonatkozó technikai adatlapokat és további információkat lásd itt: <https://global.widex.com>.


A TÖLTŐ ÜZEMELTETÉSE

Felkészülés a használatra


A fedél

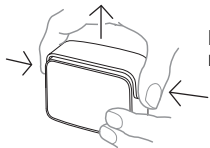

Használat előtt fogja meg a kihajtható fedelet mindkét oldalánál, és emelje felfelé.

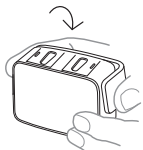


Ezt követően húzza át arra az oldalra, ahol az USB-port található.

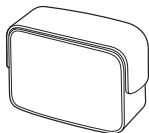


Ha nem használja a töltőt, zárja le a kihajtható fedelet a töltő mélyedéseinek védelmére. Egyszerűen húzza a kihajtható fedelet felfelé a felső rész lefedéséhez, majd nyomja le.

Tápellátás


A töltőt különféle tápellátáshoz csatlakoztathatja 5V DC, 500 mA kimenet jellemzők mellett:

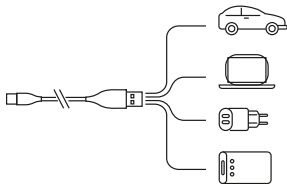

Csak a mellékelt USB-kábelt használja.

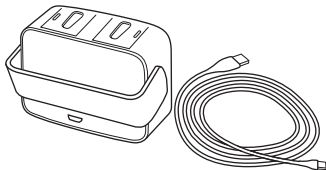

Csatlakoztassa a kábelt a töltőhöz:

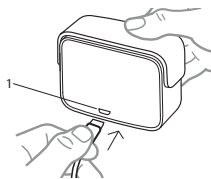

1. Mikro USB-port

Bekapcsolás


Amikor a töltőt csatlakoztatják a tápellátáshoz, a jelzőfények **5-ször felvil-
lannak fehéren**, majd kikapcsolnak:



A töltő ekkor készenléti állapotban van, és készen áll a hallókészülék töl-
tésére.

A hallókészülék töltése

Óvatosan helyezze a hallókészüléket a töltő mélyedésébe. A hallókészülék automatikusan kikapcsol.

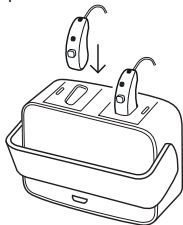

Tápellátáshoz csatlakoztatva a töltő egyszerre két hallókészüléket is tud tölteni, de a hallókészülékek egyenként is tölthetők, az adott hallókészülék töltöttségi állapotától függően.


Ez azt jelenti, hogy ha az egyik hallókészülék teljesen feltöltött állapotban van, és behelyezi a töltőbe, nem indul el a töltés.

Ha a másik hallókészülék azonban *nincs* feltöltve, akkor elindul a töltés.

A hallókészülék teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe. Ha fél órán át tölti a hallókészüléket, körülbelül 4 óra hosszáig tudja használni.


Töltési jelzőfények

Miközben a töltő a hallókészüléket érzékeli, a jelzőfény **folyamatosan sárgán világít**:

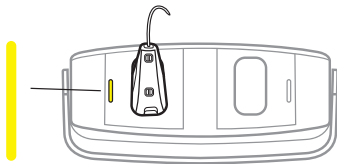


Miután a töltő észlelte a hallókészüléket, megkezdődik a töltés.


A jelzőfény **zölden villog**, ha a hallókészülék töltöttségi szintje alacsony, és kevesebb mint **40%-os a feltöltés**:

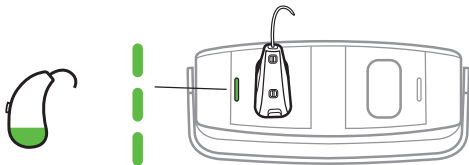

A **zölden izzó** jelzőfény azt jelzi, hogy a hallókészülék töltöttsége több mint **40%-os**:

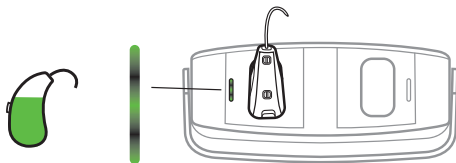

A jelzőfény **folyamatosan zölden világít**, ha a hallókészülék töltöttsége **100%-os**:

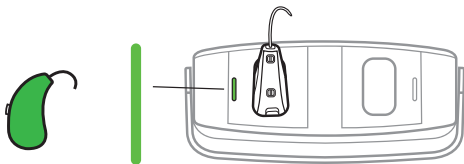

Töltés után

Amikor eltávolítja a töltőrekeszből, ne húzza a hallókészüléket a fülvezetékénél fogva, mert ez károsíthatja a fülvezeték és a hallókészülék közötti csatlakozást.

Ehelyett két ujjal fogja meg a hallókészüléket, amikor kiveszi a töltőből.





Amikor eltávolítja a hallókészüléket a töltőből, a hallókészülék néhány másodperc után bekapcsol.



Ha nem veszi rögtön használatba, ne feledje kikapcsolni.

Közvetlenül a töltés után előfordulhat, hogy a hallókészülék átmenetileg melegnek tűnik.

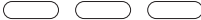Ha ez kellemetlen érzést okoz, várjon néhány percet, amíg a hallókészülék eléri a környezeti hőmérsékletet, és csak ezt követően vegye fel.

A jelzőfények áttekintése

Jelzőfények	Állapot
Villogó fehér 	A töltő csatlakoztatva van a tápellátásra
Folyamatos sárga 	A töltő észleli a hallókészüléket
Villogó zöld 	A hallókészülék töltése folyamatban van Alacsony töltöttségű akkumulátor, kevesebb mint 40%
Zölden izzó 	A hallókészülék töltése folyamatban van Az akkumulátor töltöttsége több mint 40%-os

Jelzőfények	Állapot
Folyamatos zöld 	A hallókészülék teljesen fel van töltve Az akkumulátor töltöttsége 100%-os
Egy jelzőfény pirosan villog 	Hiba történt a töltés közben, és a töltés leállt. Lásd a Hibaelhárítást
Mindkét jelzőfény pirosan villog 	Hiba történt a töltés közben, és a töltés leállt. Lásd a Hibaelhárítást
Villogó sárga 	A hallókészülék hőmérséklete túlságosan magas lett a töltés során ,és a töltés szünetel Lásd a Hibaelhárítást

TISZTÍTÁS

A töltő általában nem igényel tisztítást. Ha szükséges, óvatosan törölje le a töltőt puha, száraz törlőruhával.

Ha port észlel a töltő mélyedésében, finoman fújjon rá, hogy megtisztítsa. Ha ez nem elég, óvatosan tisztítsa meg a töltő mélyedését egy fültisztítóval.



A töltő fülzsírtól való megtisztításához óvatosan törölje át enyhe tisztítószeres oldatos, puha törlőruhával.




Soha ne használjon éles/hegyes tárgyakat a töltő tisztításához.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ezekon az oldalakon tanácsokat talál arra az esetre, ha a töltő nem a várt-
nak megfelelően működne.

Jelzőfények	Lehetséges ok	Megoldás
Nem világít jelző- fény	A töltő nincs csatlakoztatva	Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel csat- lakoztatva van egy tápa- dapterhez, és csatlakozik a fali aljzathoz.
	A hallókészülék nem megfelelően van behe- lyezve a töltőbe	Helyezze el a hallókészü- léket megfelelően a töltő- ben
Egyik vagy mindkét jelzőfényárságán vil- log 	A környezet vagy a halló- készülék hőmérséklete meghaladja a kritikus ha- tárértéket, és a töltés szünetel	A töltés akkor folytatódik, amikor a környezet vagy a hallókészülék hőmér- séklete csökkent. Ha ez rendszeresen előfordult, keressen egy hűvösebb helyet a halló- készülék töltésére
Egy jelzőfény piro- san villog 	A töltő nem tudja észlelni a hallókészüléket	Vegye ki a nem kompati- bilis hallókészüléket

Jelzőfények	Lehetséges ok	Megoldás
	A hallókészüléknél kritikus szintű hiba merült fel	Távolítsa el a hallókészüléket, húzza ki a tápkábelt 10 másodpercre, majd próbálja újra Ha a töltő továbbra is villogópiros, lépjen kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel
Mindkét jelzőfény villogópiros 	A töltőnél kritikus szintű hiba merült fel	Távolítsa el a hallókészüléket, húzza ki a tápkábelt 10 másodpercre, majd próbálja újra Ha a töltő továbbra is villogó piros, lépjen kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel

ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Javallott használat

A WPT202 modell a támogatott hallókészülék(ek) töltésére használható.

EU-irányelvek

2014/53/EU irányelv

A WSAUD A/S ezúton kijelenti, hogy a WPT202 megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A WPT202 egy rádióadót tartalmaz, amely a következő tartományban üzemel: 6,78 MHz, 13,4 dB μ A/m, 3 méteres sugárban.

A 2014/53/EU irányelv szerinti Megfelelőségi nyilatkozat példánya a következő címen érhető el:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Hulladékként való kezelésre vonatkozó információ

Ne dobja ki a hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és a töltőket a normál háztartási hulladék közé.

A hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és a töltőket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak fenntartott gyűjtőhelyen szabad kidobni, illetve biztonságos hulladékkezelés céljából át kell adni a hallókészülék-szakértőnek.

Az eszközök visszaküldésével, illetve szállításával kapcsolatban forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.

JELÖLÉSEK

Az orvosi eszközök címkéin (címkék, használati útmutató stb.) WSAUD A/S által általánosan használt jelölések

Jelölés

Cím/leírás



Gyártó

A terméket a jelölés mellett feltüntetett nevű és című gyártó állította elő. Amennyiben értelmezhető, a gyártási időt is itt tüntetik fel.



Katalógusszám

A termék katalógus- (vagy cikk-) száma.



Olvassa el a használati útmutatót

A használati útmutató fontos figyelmeztető információkat (figyelmeztetéseket/óvintézkedéseket) tartalmaz, és a termék használata előtt el kell olvasni.



Figyelem

A figyelmeztető jelöléssel ellátott szövegrészeket kötelező elolvasni a termék használata előtt.



WEEE jelölés

„Ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.” Ha egy termék eléri az élettartama végét, azt el kell juttatni a kijelölt gyűjtőpontra annak újrahasznosítása és újrafeldolgozása érdekében, így elkerülve a környezet és az emberi egészség károsításának kockázatát, amelyet a veszélyes anyagok okoznak.

Jelölés	Cím/leírás
	<p>CE jelölés A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó európai irányelvekben lefektetett követelményeknek.</p>
	<p>RCM jelölés A termék megfelel az ausztrál vagy az új-zélandi piacra szállított termékekre érvényes, villamos biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre és rádióspektrumra vonatkozó szabályozói követelményeknek.</p>
	<p>FCC-logó A termék megfelel a vonatkozó USA 47 CFR szabályozásnak. FCC – Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság).</p>
	<p>Orvostechnikai eszköz Annak jelzése, hogy az eszköz orvostechnikai eszköz.</p>

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudoti kroviklį, atidžiai perskaitykite šiuos puslapius.



Įkroviklį ir kitas mažas dalis laikykite atokiau nuo vaikų, naminių gyvūnėlių ir psichinę negalią turinčių žmonių.



Niekada nelaikykite įkroviklio aukštesnėje kaip 50 °C (122 °F) temperatūroje, saulės atokaitoje, šalia atviros liepsnos ar ugnies šaltinių.



Įkroviklį padėkite tiesiai ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kur yra pakankamai vietos aplink kroviklį. Negalima uždengti ar laikyti šalia degių medžiagų.



Niekada nebandykite atidaryti ar remontuoti kroviklio patys. Jei susidūrėte su gedimu, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.



Su savo klausos aparatu naudokite tik WPT202 kroviklį. Nerekomenduojama naudoti WSAUD A/S kroviklio, nes jis gali sugadinti sistemą ar sukelti pavojingą situaciją.



Niekada nepalikite kroviklio tiesioginiuose saulės spinduliuose ir nepardinkite į vandenį.



Į krovimo šulinėlius niekada nedėkite kitų objektų nei jūsų klausos aparatai.



Maitinimo adapteris turi atitikti IEC 60601-1, IEC 62368-1 arba lygiavertčius saugos standartus, kurie yra priimtini jūsų regione. Visada naudokite pridedamą USB laidą su maitinimo adapteriu su USB-A tipo lizdu.

JŪSŲ KROVIKLIS

Sveiki

Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį, skirtą įkrauti palaikomus klausos aparatus.


Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudoti prietaisą.

PASTABA

Jūsų kroviklis gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šioje knygelėje. Pasilieka-me teisę atlikti reikiamus pakeitimus.

Trumpai apie kroviklį

Kroviklis turi įkrovimo šulinėlis kiekvienam klausos aparatui ir du šviesos indikatorius, kurie rodo įkrovimo klausos aparatų būseną.

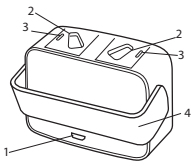

1. Mikro USB prievadas
2. Įkrovimo šulinėliai
3. Šviesos indikatoriai
4. Varstomas dangtelis

Eksploatacijos, sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Jūsų kroviklis skirtas naudoti viduje. Jis yra jautrus ekstremalioms sąlygoms, tokioms kaip aukšta temperatūra, ir jis neturėtų būti eksploatuojamas, laikoma ar transportuojamas tiesioginėje saulės šviesoje.

Kroviklį naudokite toliau nurodytomis sąlygomis:

	Min.	Maks.
Temperatūra	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Drėgmė	10 % rH	95 % rH

Kroviklį laikykite ir transportuokite toliau nurodytomis sąlygomis:


	Min.	Maks.
Temperatūra	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Drėgmė	10 % rH	95 % rH
Atmosferos slėgis	750 mbar	1060 mbar

Techninius duomenų lapus ir papildomą informaciją apie savo kroviklį rasite <https://global.widex.com>.

KROVIKLIO NAUDOJIMAS

Paruošimas naudoti


Dangtelis

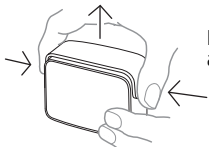

Prieš naudodami suimkite varstomą dangtelį iš abiejų pusių ir pakelkite jį aukštyn.




Tada patraukite jį link šono su USB prievadu.

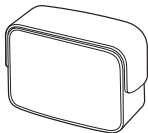


Kai kroviklio nenaudojate, uždarykite varstomą dangtelį kad apsaugotumėte krovimo šulinėlius. Tiesiog patraukite varstomą dangtelį aukštyn, kad dangtelis uždengtų viršų ir nuspauskite žemyn.

Maitinimo šaltinis


Jkroviklį galite prijungti prie skirtingų maitinimo su 5V DC, 500 mA galia.

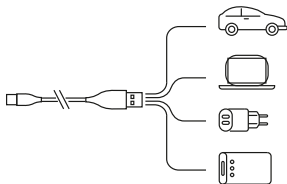

Naudokite tik pridedamą USB laidą.

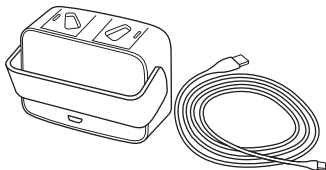


Prie kroviklio prijunkite laidą:

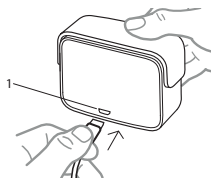

1. Mikro USB prievadas

Maitinimas įjungtas


Kai kroviklis prijungtas prie maitinimo šaltinio, šviesos indikatoriai **sumirksi baltai 5 kartus** ir išjungs:

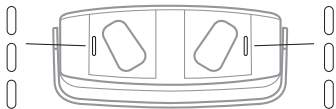

Kroviklis dabar veikia budėjimo režimu ir yra pasiruošęs įkrauti klausos aparatą.

Klausos aparato įkrovimas

Švelniai įstatykite klausos aparatą į krovimo šulinėlį. Klausos aparatas išsijungia automatiškai.

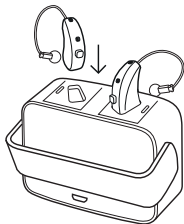

Prie maitinimo prijungtas kroviklis gali įkrauti du klausos aparatus vienu metu, bet kiekvienas klausos aparatas gali būti kraunamas atskirai, priklausomai nuo klausos aparato būklės.


Tai reiškia, kad jei vienas klausos aparatas yra visiškai įkrautas ir įstatomas į kroviklį, jis nebus įkraunamas.

Tačiau, jei kitas klausos aparatas yra *išsikrovęs*, jis įsikraus.

Klausos aparatas visiškai įkraunamas maždaug per 4 valandas. Jei įkrausite klausos aparatą pusvalandį, jis veiks daugmaž 4 valandas


Krovimo indikatoriai

Kai kroviklis aptinka klausos aparatą, šviesos indikatorius pradeda **šviesti geltonai**:

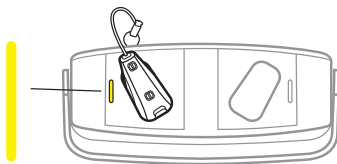


Kai kroviklis aptinka klausos aparatą, pradedamas krovimas.


Šviesos indikatorius **mirksi žaliai** nurodydamas, kad klausos aparatas yra išsikrovęs ir įkrautas iki **40 %**:

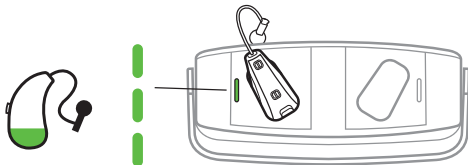

Šviesos indikatorius pradės **pulsuoti žaliai**, nurodydamas, kad klausos aparatas įkrautas daugiau kaip **40 %**:

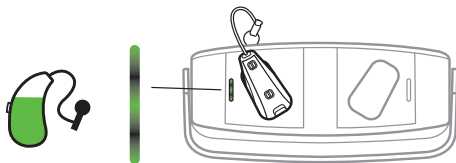

Šviesos indikatorius pradės **šviesti žaliai**, nurodydamas, kad klausos aparatas įkrautas **100 %**:

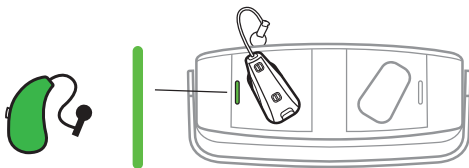

Po įkrovimo

Neištraukite klausos aparatų iš šulinėlio už laidelių / vamzdelio, nes taip galima pažeisti kontaktą su klausos aparatu.

Vietoj to, traukdami klausos aparatą iš kroviklio, suimkite jį pirštais.
Ištraukus klausos aparatą iš kroviklio, jis įsijungia po kelių sekundžių.

Nepamirškite išjungti, jei ketinate jo naudoti iš karto.

Iškart po įkrovimo, klausos aparatas gali laikinai būti šiltas.


Jei jums tai nemalonu, palaukite kelias minutes, kad klausos aparatas pasiektų kambario temperatūrą prieš įstatydami klausos aparatą į ausį.

Šviesos indikatorių apžvalga

Šviesos indikatoriai

Būseną

Mirksintis baltas

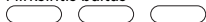

Įkroviklis prijungtas prie maitinimo

Šviečia geltonai



Įkroviklis aptiko klausos aparatą

Mirksi žaliai



Klausos aparatas kraunamas
Maža įkrova iki 40 %

Pulsuoja žaliai



Klausos aparatas kraunamas
Įkrova didesnė kaip 40 %

Šviečia žaliai



Klausos aparatas įkrautas
Baterija įkrauta 100 %

Vienas indikatorius mirksi raudonai



Įkrovimo metu įvyko klaida ir įkrovimas sustabdytas
Žr. Gedimų šalinimas

Šviesos indikatoriai

Būsena

Abu indikatoriai mirksi raudonai



Įkrovimo metu įvyko klaida ir įkrovimas sustabdytas
Žr. Gedimų šalinimas

Mirksi geltonas



Įkrovimo metu klausos aparatas pernelyg įkaito ir įkrovimas laikinai sustabdytas
Žr. Gedimų šalinimas

VALYMAS

Įkroviklio paprastai nereikia valyti. Jei reikia, atsargiai nuvalykite įkroviklį minkšta sausa šluoste.

Jei kroviklio šulinėlyje pastebėjote dulkių, švelniai išpūskite. Jei to nepakanka, švelniai išvalykite kroviklį ausų krapštuku.



Norėdami pašalinti iš kroviklio ausų vašką, atsargiai nuvalykite minkštu skudurėliu su trupučiu švelnaus buitinio ploviklio.



Niekada nenaudokite aštrių / smailių daiktų krovikliui valyti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Šiuose puslapiuose pateikiami patarimai, ką daryti, jei kroviklis neveikia taip, kaip numatyta.

Šviesos indikatoriai	Galima priežastis	Sprendimas
Jokių šviesų	Kroviklis neprijungtas	Įsitikinkite, kad USB laidas prijungtas prie maitinimo adapterio, o šis prijungtas prie elektros lizdo
	Klausos aparatas netinkamai įdėtas į kroviklį	Tinkamai įstatykite klausos aparatą į kroviklį
Vienas arba abu indikatoriai mirksi geltonai 	Jūsų aplinkos arba klausos aparato temperatūra viršija kritinę ribą ir įkrovimas pristabdomas	Įkrovimas bus tęsiamas, kai aplinkos arba klausos aparato temperatūra nukris. Tokių atvejų nuolatieskokite vėsesnės vietos klausos aparatui įkrauti
Vienas indikatorius mirksi raudonai 	Įkroviklis negali atpažinti klausos aparato	Išimkite nesuderinamą klausos aparatą

Šviesos indikatoriai	Galima priežastis	Sprendimas
	Klausos aparate įvyko kritinė klaida	Išimkite klausos aparata, atjunkite nuo maitinimo 10 sekundžių ir bandykite dar kartą Jei kroviklis vis tiek mirksiraudona šviesa, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą
Abu indikatoriai mirksiraudonai 	Įvyko kritinė įkroviklio klaida	Išimkite klausos aparata, atjunkite nuo maitinimo 10 sekundžių ir bandykite dar kartą Jei kroviklis vis tiek mirksi raudona šviesa, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą

TEISINĖ INFORMACIJA

Paskirtis

WPT202 modelis naudojamas įkrauti palaikomus klausos aparatus.

ES direktyvos

Direktyva 2014/53/ES

Šiuo dokumentu WSAUD A/S patvirtina, kad prietaisas WPT202 atitinka esminius reikalavimus ir susijusias sąlygas, nurodytas Direktyvoje 2014/53/ES.

WPT202 yra radijo siųstuvas, veikiantis: 6,78 MHz dažniu, 13,4 dB μ A/m 3 m atstumu.

Vadovaujantis Direktyvos 2014/53/ES nuostatomis, atitikties deklaracija pateikiama

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Informacija apie šalinimą

Neišmeskite klausos aparato, jo priedų ir kroviklių kartu su buitinėmis atliekomis.

Klausos aparatai, priedai ir krovikliai turi būti išmetami elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietose arba perduodami atliekų perdirbėjams.

Norėdami grąžinti arba siųsti prietaisus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

SIMBOLIAI

WSAUD A/S dažniausiai naudojami simboliai, žymimi ant medicinos prietaisų (etikečių, naudojimo instrukcijų ir t.t.)

Simbolis	Pavadinimas / aprašas
----------	-----------------------



	Gamintojas
--	-------------------

	Produktą pagamino gamintojas, kurio pavadinimas ir adresas nurodyti prie šio simbolio. Jei reikia, gali būti nurodyta ir pagaminimo data.
--	---



	Katalogo numeris
--	-------------------------

	Produkto katalogo (prekės) numeris.
--	-------------------------------------



	Žr. naudojimo instrukcijas
--	-----------------------------------

	Naudotojo instrukcijose yra svarbios atsargumo (įspėjimų / atsargumo priemonių) informacijos, todėl jas būtina perskaityti prieš naudojant produktą.
--	--







	Įspėjimas
--	------------------

	Įspėjimo simboliu pažymėtą tekstą reikia perskaityti prieš naudojant produktą.
--	--



	WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) ženklas
--	--

	Negalima išmesti su įprastinėmis atliekomis. Norint išmesti gaminį jį reikia nusiųsti į tinkamą surinkimo punktą perdirbimui ir naudingų medžiagų išėmimui siekiant apsaugoti nuo galimo gaminyje esančių kenksmingų medžiagų žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
--	--

Simbolis	Pavadinimas / aprašas
	CE ženklas Produktas atitinka Europos Sąjungos CE ženklavimo direktyvoje išdėstytus reikalavimus.
	RCM žymė Produktas atitinka nustatytus elektrinio saugumo, EMC (elektromagnetinio suderinamumo) ir radijo bangų spektro reikalavimus, taikomus produktams, tiekiamiems į Australijos arba Naujosios Zelandijos rinką.
	FCC logotipas Produktas atitinka atitinkamas JAV 47 CFR taisyklės. FCC – Federalinė ryšių komisija
	Medicinos prietaisais Nuoroda, kad tai yra medicinos priemonė.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Pirms lādētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs lapas.



Sargājiet lādētāju un citas mazas daļas no bērniem, mājdzīvniekiem un personām ar garīgiem traucējumiem.



Nekad nepakļaujiet lādētāju temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C (122 °F), ilgstošai saules gaismas iedarbībai, atklātai liesmai vai aizdegšanās avotiem.



Uzlādes laikā novietojiet lādētāju vertikāli uz līdzenas, stabilas virsmas, atstājot ap lādētāju pietiekami daudz brīvas vietas. Neapklājiet ierīci un novietojiet to uzliesmojošu vielu tuvumā.



Nekādā gadījumā neatveriet un neremontējiet lādētāju. Ja konstatējat defektus, sazinieties ar savu dzirdes speciālistu.



Saviem dzirdes aparātiem izmantojiet tikai WPT202 lādētāju. Lietojot lādētāju, kuru nav ieteicis uzņēmums WSAUD A/S, iespējami sistēmas bojājumi vai bīstamas situācijas.



Nekādā gadījumā neatstājiet lādētāju tiešā saules gaismā un nemērciet to ūdenī.



Nekādā gadījumā neievietojiet uzlādes atverēs priekšmetus, kas nav jūsu dzirdes aparāti.



Strāvas adapterim jāatbilst standartam IEC 60601-1, IEC 62368-1 vai līdzvērtīgiem drošības standartiem, kas ir pieņemami jūsu reģionā. Vienmēr izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli ar strāvas adapteri, kam ir USB-A tipa ligzda.

JŪSU LĀDĒTĀJS

Laipni lūdzam!

Paldies, ka izvēlējāties šo produktu, kas paredzēts atbalstīto dzirdes aparātu uzlādešanai.


Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

PIEZĪME

Iespējams, ka lādētājs neizskatās tieši tāds, kā parādīts šajā brošūrā. Mēs paturam tiesības veikt jebkāda veida izmaiņas, kuras uzskatām par nepieciešamām.

Īss lādētāja apskats

Lādētājam ir katram dzirdes aparātam paredzēta uzlādes atvere, kā arī divi gaismas indikatori, kas parāda dzirdes aparātu uzlādes statusu.

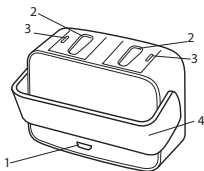

1. Mikro USB pieslēgvietā
2. Uzlādes atveres
3. Gaismas indikatori
4. Atverams vāks

Lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi

Lādētājs ir paredzēts lietošanai iekštelpās. Tas ir jutīgs pret ekstremāliem apstākļiem, piemēram, augstu temperatūru, un to nedrīkst lietot, uzglabāt vai transportēt tiešos saules staros.

Lietojiet lādētāju atbilstoši tālāk minētajiem apstākļiem.

	Minimālā vērtība	Maksimālā vērtība
Temperatūra	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Mitruma līmenis	10% rH	95% rH

Uzglabājiet un transportējiet lādētāju atbilstoši tālāk minētajiem apstākļiem.


	Minimālā vērtība	Maksimālā vērtība
Temperatūra	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Mitruma līmenis	10% rH	95% rH
Atmosfēras spiediens	750 mbar	1060 mbar

Savu dzirdes aparātu tehnisko datu lapas un papildinformāciju par lādētāju varat atrast šeit: <https://global.widex.com>.


LĀDĒTĀJA DARBINĀŠANA

Sagatavošanās lietošanai


Vāciņš

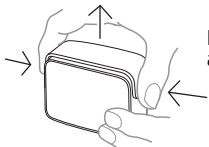

Pirms lietošanas satveriet vāciņu ar eņģi aiz abām pusēm un paceliet uz augšu.

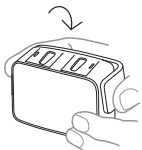


Pēc tam pavelciet to uz pusi, kurā ir USB pieslēgvieta.

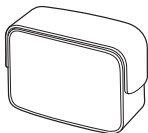


Kad lādētājs netiek lietots, aizveriet vāciņu ar eņģi aizsargājot uzlādes atveres. Vienkārši pavelciet vāciņu ar eņģi augšup, nosedzot augšdaļu, un pēc tam to piespiediet.

Barošanas avots


Varat pievienot lādētāju dažādiem barošanas avotiem ar 5 V līdzstrāvasun 500 mA izvadi.

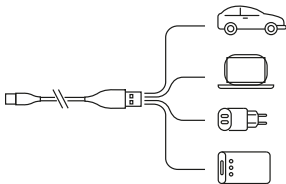

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto USB kabeli.

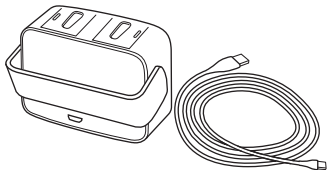

Pievienojiet USB kabeli lādētājam:

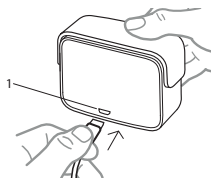

1. Mikro USB pieslēgvietā

ieslēgšana


Kad lādētājs ir pievienots barošanas avotam, gaismas indikatori **5 reizes nomirgo baltā krāsā** un izslēdzas.



Lādētājs darbojas gaidīšanas režīmā un ir gatavs uzlādēt dzirdes aparātu.

Dzirdes aparāta uzlāde

Saudzīgi ievietojiet dzirdes aparātu uzlādes atverē. Dzirdes aparāts automātiski izslēdzas.

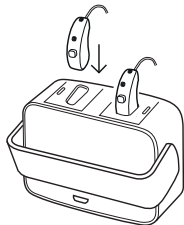

Ja ir izveidots savienojums ar strāvas padevi, lādētājs var vienlaicīgi uzlādēt divus dzirdes aparātus, tomēr katru dzirdes aparātu atkarībā no tā stāvokļa var uzlādēt arī atsevišķi.


Tas nozīmē, ka gadījumā, ja viens dzirdes aparāts ir pilnībā uzlādēts un ievietots lādētājā, tas netiks uzlādēts.

Toties, ja otrs dzirdes aparāts *nav* uzlādēts, tas tiks uzlādēts.

Dzirdes aparāta pilnīgai uzlādēšanai nepieciešamas apmēram 4 stundas. Uzlādējot dzirdes aparātu pusstundu, varēsīt to lietot apmēram 4 stundas.


Uzlādes indikatori

Kamēr lādētājs konstatē dzirdes aparāta klātbūtni, gaismas indikators nepārtraukti **deg dzeltenā krāsā**:

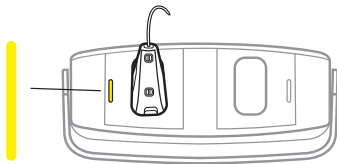


Kad lādētājs ir konstatējis dzirdes aparātu, tiek sākota uzlāde.


Gaismas indikators **nomirgo zaļā krāsā**, norādot, ka dzirdes aparātam ir zems uzlādes līmenis, kas **nepārsniedz 40%**:

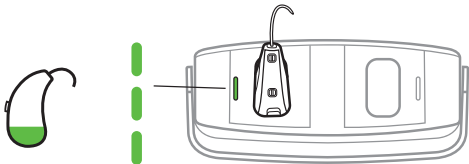

Gaismas indikators **spīd zaļā krāsā**, norādot, ka dzirdes aparāta uzlādes līmenis **pārsniedz 40%**:

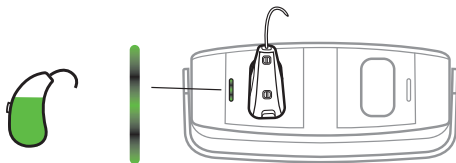

Gaismas indikators **nepārtraukti deg zaļā krāsā**, norādot, ka dzirdes aparāta uzlādes līmenis ir **100%**:

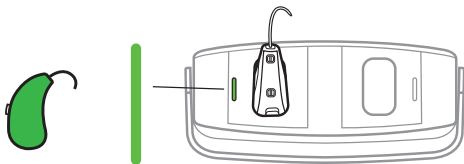

Pēc uzlādes

Neizņemiet dzirdes aparātus no uzlādes atverēm, velkot aiz auss vada, jo tādējādi var sabojāt dzirdes aparāta savienojumu.

Satveriet dzirdes aparātu pirkstos un izņemiet no lādētāja.

Izņemot dzirdes aparātu no lādētāja, dzirdes aparāts ieslēdzas pēc dažām sekundēm.

Neaizmirstiet to izslēgt, ja negrasāties izmantot to uzreiz.

Tūlīt pēc uzlādes dzirdes aparāts var īslaicīgi būt sakarsis.

Ja tas jums sagādā neērtības, pagaidiet dažas minūtes, līdz dzirdes aparāts sasniedz istabas temperatūru, un tikai pēc tam sāciet to lietot.

Gaismas indikatoru pārskats

Gaismas indikatori

Statuss

Mirgo baltā krāsā



Lādētājs ir pievienots barošanas avotam

Nepārtraukti deg dzeltenā krāsā



Lādētājs cenšas konstatēt dzirdes aparātu

Mirgo zaļā krāsā







Notiek dzirdes aparāta uzlāde
Zems akumulatora uzlādes līmenis,
mazāks par 40%

Spīd zaļā krāsā



Notiek dzirdes aparāta uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 40%

Gaismas indikatori	Statuss
Nepārtraukti deg zaļā krāsā 	Dzirdes aparāts ir pilnīgi uzlādēts Akumulatora uzlādes līmenis ir 100%
Viens indikators mirgo sarkanā krāsā 	Uzlādes laikā radās kļūda, un uzlāde ir apturēta Skatiet sadaļu Problēmu novēršana
Abi indikatori mirgo sarkanā krāsā 	Uzlādes laikā radās kļūda, un uzlāde ir apturēta Skatiet sadaļu Problēmu novēršana
Mirgo dzeltenā krāsā 	Dzirdes aparātu temperatūra uzlādes laikā ir kļuvusi pārāk augsta, un uzlāde ir apturēta Skatiet sadaļu Problēmu novēršana

TĪRĪŠANA

Parasti lādētājam nav nepieciešama tīrīšana. Ja nepieciešams, uzmanīgi noslaukiet lādētāju ar mīkstu, sausu drānu.

Ja uzlādes atverē pamanāt putekļus, saudzīgi nopūtiēt tos. Ja ar to nepietiek, saudzīgi notīriet uzlādes atveri ar vates kociņu.



Lai noņemtu auru sēru no lādētāji, uzmanīgi noslaukiet to ar sausu drānu, izmantojot nelielu daudzumu saudzīga sadzīves tīrīšanas līdzekļa.



Nekad neizmantojiet lādētāja tīrīšanai asus/izvirzītus objektus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Šajās lapās ir informācija par rīcību, ja lādētājs nedarbojas, kā paredzēts.

Gaismas indikatori	Iespējamais iemesls	Risinājums
Nedeg gaisma	Lādētājs nav pievienots	Pārlicinieties, vai USB kabelis ir pievienots strāvas adapterim un pēc tam pievienots sienas kontaktligzdai
	Dzirdes aparāts nav pareizi ievietots lādētājā	Ievietojiet dzirdes aparātu lādētājā pareizi
Viens vai abi indikatorimirgo dzeltenā krāsā 	Jūsu apkārtnes vai dzirdes aparāta temperatūra pārsniedz kritisko robežu, un uzlāde ir pārtraukta	Uzlāde turpināsies, kad jūsu apkārtnes vai dzirdes aparāta temperatūra samazināsies. Ja tā notiek nepārtraukti,, sameklējiet dzirdes aparāta uzlādēšanai vēsāku vietu
Viens indikators mirgo sarkanā krāsā 	Lādētājs nevar atpazīt dzirdes aparātu	Noņemiet nesaderīgo dzirdes aparātu

Gaismas indikatori	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Dzirdes aparātam ir kritiska kļūda	Noņemiet dzirdes aparātu, atvienojiet to no strāvas uz 10 sekundēm un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja lādētāja indikators joprojām mirgosarkanā krāsā, sazinieties ar savu dzirdes speciālistu
Abi indikatori mirgosarkanā krāsā 	Lādētājam ir kritiska kļūda	Noņemiet dzirdes aparātu, atvienojiet to no strāvas uz 10 sekundēm un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja lādētāja indikators joprojām mirgo sarkanā krāsā, sazinieties ar savu dzirdes speciālistu

REGLAMENTĒJOŠĀ INFORMĀCIJA

Paredzētā lietošana

WPT202 modeli izmanto, lai uzlādētu atbalstītos dzirdes aparātus.

ES direktīvas

Direktīva 2014/53/ES

Ar šo WSAUD A/S apliecina, ka modelis WPT202 atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem. Modelim WPT202 ir radiatoritājs, kas darbojas 6,78 MHz frekvencē ar 13,4 dB μ A/m 3 metru rādiusā.

Atbilstības deklarācijas kopiju saskaņā ar 2014/53/ES var iegūt vietnē

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Informācija par likvidēšanu





Neizmetiet dzirdes aparātus, dzirdes aparātu piederumus un lādētājus sadzīves atkritumos.

Dzirdes aparāti, dzirdes aparātu piederumi un lādētāji ir jālikvidē elektriskām un elektroniskām iekārtām paredzētajās vietās vai jānodod dzirdes speciālistam drošai likvidācijai.

Lai atdotu vai nosūtītu ierīces, sazinieties ar dzirdes aprūpes speciālistu.

SIMBOLI

Simboli, ko WSAUD A/S parasti izmanto medicīnisko ierīču marķēšanai (marķējums, lietošanas instrukcijas u.c. dokumenti)

Simbols	Nosaukums/apraksts
	Ražotājs Produkta ražotājs ir uzņēmums, kura nosaukums un adrese ir norādīta blakus simbolam. Ja vajadzīgs, ir norādīts arī ražošanas datums.
	Kataloga numurs Produkta kataloga (preces) numurs.
	Skatīt lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijā ir svarīga informācija par piesardzību (brīdinājumi/piesardzības pasākumi), un tā ir jāizlasa pirms produkta lietošanas.
	Brīdinājums Teksts, kas apzīmēts ar brīdinājuma simbolu, ir jāizlasa pirms produkta lietošanas.
	EIIA marķējums “Nav paredzēts likvidēt kā sadzīves atkritumus” Kad produkts ir jālikvidē, tas jānogādā īpaši paredzētā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei un atjaunošanai, lai novērstu risku, kas saistīts ar bīstamo vielu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
	CE marķējums Produkts atbilst Eiropas CE marķējuma direktīvu prasībām.

Simbols**Nosaukums/apraksts**

**RCM markējums**

Produkts atbilst elektriskās drošības, elektromagnētiskās saderības un radio spektra normatīvajām prasībām attiecībā uz produktiem, kas tiek piegādāti Austrālijas vai Jaunzēlandes tirgum.

**FCC logotips**

Produkts atbilst attiecīgajiem ASV 47 CFR noteikumiem.
FCC0— Federal Communications Commission Statement

**Medicīniskā ierīce**

Norāde, ka ierīce ir medicīniskā ierīce.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les disse sidene nøye før du begynner å bruke laderen.



Laderen og andre små deler skal oppbevares utilgjengelig for barn, kjæledyr og psykisk utviklingshemmede.



Utsett aldri laderen for temperaturer over 50 °C (122 °F), for langvarig sollys, åpen flamme eller antennelseskilder.



Plasser laderen i stående stilling på en flat, stabil overflate ved lading og med tilstrekkelig plass rundt laderen. Laderen skal ikke dekkes til eller plasseres i nærheten av brennbare stoffer.



Prøv aldri å åpne eller reparere laderen selv. Ta kontakt med hørsels-spesialisten hvis du opplever feil.



Bruk bare en WPT202-lader til høreapparatene dine. Hvis du bruker en lader som ikke er anbefalt av WSAUD A/S, kan det skade systemet eller føre til farlige situasjoner.



La aldri laderen ligge i direkte sollys, og ikke senk den i vann.



Sett aldri inn andre gjenstander enn høreapparatene i ladesporene.



Strømadapteren må være i samsvar med IEC 60601-1, IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder som er akseptable i din region. Bruk alltid den medfølgende USB-kabelen med en strømadapter med en kontakt av USB-A-typen.

LADEREN

Velkommen

Takk for at du valgte dette produktet, som er beregnet på å lade kompatible høreapparater.


Les disse instruksjonene nøye før enheten tas i bruk.

MERK

Det kan hende at laderen ikke ser nøyaktig ut som den som er illustrert i dette heftet. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre eventuelle endringer vi anser som nødvendige.

En oversikt over laderen

Laderen har et ladespor for hvert høreapparat og to lysindikatorer som viser ladestatusen til høreapparatene.

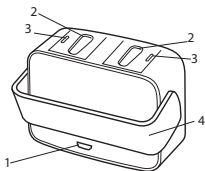

1. Mikro-USB-port
2. Ladespor
3. Lysindikatorer
4. Hengslet deksel

Drifts-, oppbevarings- og transportbetingelser

Laderen er beregnet for innendørs bruk. Det er følsomt for ekstreme forhold som høye temperaturer, og det skal ikke betjenes, oppbevares eller transporteres i direkte sollys.

Bruk laderen under følgende forhold:

	Minimum	Maksimum
Temperatur	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Fuktighet	10 % rH	95 % rH

Oppbevar og transporter laderen under følgende forhold:


	Minimum	Maksimum
Temperatur	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Fuktighet	10 % rH	95 % rH
Atmosfærisk trykk	750 mbar	1060 mbar

Du finner tekniske datablad og ytterligere informasjon om laderen på <https://global.widex.com>.


BRUKE LADEREN

Gjøre klar til bruk


Dekselet

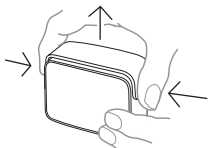

Før bruk tar du tak i det hengslede dekselet på begge sider og løfter det opp.

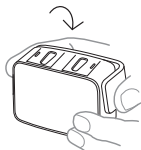


Trekk det deretter til siden med USB-porten.

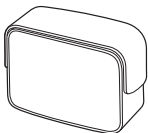


Når du ikke bruker laderen, må du lukke det hengslede dekselet for å beskytte ladesporene. Bare trekk det hengslede dekselet oppover for å dekke til toppen, og trykk det ned.

Strømforsyning


Du kan koble laderen til forskjellige strømforsyninger med 5 V likestrøm, 500 mA-utgang:

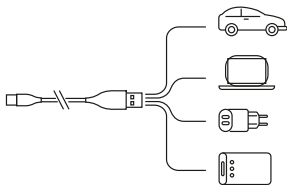

Bruk bare den medfølgende USB-kabelen.

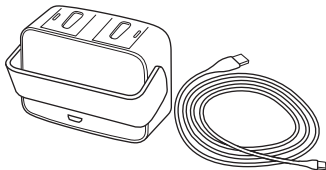

Koble kabelen til laderen.

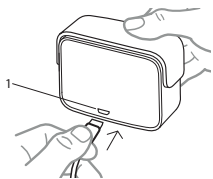

1. Micro USB-port

Slå på


Når laderen er koblet til strømforsyningen, vil lysindikatorene **blinke hvitt 5 ganger** og deretter slås av:



Laderen er nå i standby-modus og klar til å lade høreapparatet.

Lade høreapparatet

Plasser høreapparatet forsiktig i ladesporet. Høreapparatet slår seg av automatisk.

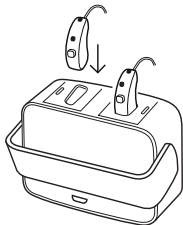

Når laderen er koblet til strøm, kan den lade to høreapparater samtidig. Hvert høreapparat kan imidlertid lades individuelt, avhengig av tilstanden til høreapparatet.


Dette betyr at hvis et høreapparat er fulladet og plasseres i laderen, vil det ikke lades.

Hvis det andre høreapparatet *ikke* er ladet, vil det bli ladet.

Det tar ca. 4 timer å lade høreapparatet helt. Hvis du lader høreapparatet i en halvtime, vil du ha strøm til ca. 4 timers bruk.


Ladeindikatorer

Mens laderen registrerer høreapparatet, lyser lysindikatoren **fast gult**:

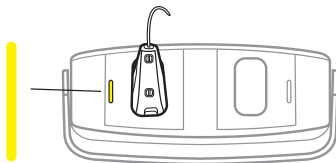


Når laderen har registrert høreapparatet, vil ladingen begynne.


Lysindikatoren vil **blinke grønt** for å indikere at høreapparatet har lite batteri og er mindre enn **40 % ladet**:

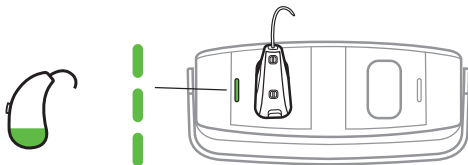

Lysindikatoren vil **lyse grønt** for å indikere at høreapparatet er mer enn **40 % ladet**:

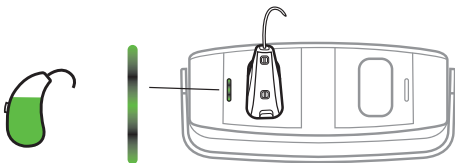

Lysindikatoren vil **lyse fast grønt** for å indikere at høreapparatet er **100 % ladet**:

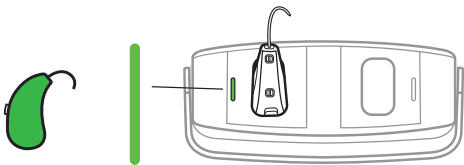

Etter lading

Unngå å ta høreapparatene ut av ladesporene ved å dra i ledningen/slangen, da dette kan skade forbindelsen til høreapparatet.

Legg heller fingrene rundt høreapparatet når du tar det ut av laderen.






Når du tar høreapparatet ut av laderen, slås høreapparatet på etter noen sekunder.

Husk å slå det av hvis du ikke skal bruke det med en gang.

Umiddelbart etter lading kan høreapparatet midlertidig være varmt å ta på.

Hvis du ikke er komfortabel med dette, venter du i noen minutter til høreapparatet når romtemperatur, før du tar det på.

Oversikt over lysindikatorer

Lysindikatorer	Status
Blinker hvitt 	Laderen er koblet til strøm
Kontinuerlig gult 	Laderen registrerer høreapparatet
Blinkende grønt 	Høreapparatet lades Lavt batteri, under 40 %
Lyser grønt 	Høreapparatet lades Batteri mer enn 40 %
Kontinuerlig grønt 	Høreapparatet er fulladet Batteri 100 % ladet

Lysindikatorer

Status

En indikator blinker rødt



Det oppstod en feil under ladingen, og ladingen har stoppet
Se Feilsøking

Begge indikatorene blinker rødt



Det oppstod en feil under ladingen, og ladingen har stoppet
Se Feilsøking

Blinker gult



Temperaturen på høreapparatet er blitt for høy under lading, og ladingen er stanset midlertidig
Se Feilsøking

RENGJØRING

Laderen krever vanligvis ikke rengjøring. Tørk om nødvendig av laderen med en myk, tørr klut.

Hvis det er støv i ladesporet, må du forsiktig blåse det rent. Hvis dette ikke er nok, rengjør du ladesporet forsiktig med en bomullsdott.



Hvis du må fjerne ørevoks fra laderen, tørker du forsiktig av med en myk klut med litt mildt husholdningsvaskemiddel.




Bruk aldri skarpe/spisse gjenstander til å rengjøre laderen.

FEILSØKING

Disse sidene inneholder råd om hva du skal gjøre hvis laderen ikke fungerer som forventet.

Lysindikatorer	Mulig årsak	Løsning
Ingen lys	Laderen er ikke tilkoblet	Kontroller at USB-kabelen er koblet til en strømadapter og koblet til en stikkontakt
	Høreapparatet er ikke satt riktig i laderen	Sett høreapparatet riktig i laderen
En av eller begge lampene blinker gult 	Temperaturen på omgivelsene eller høreapparatet overskrider en kritisk grense, og ladingen er stanset midlertidig	Ladingen vil fortsette når temperaturen i omgivelsene eller høreapparatet er lavere. Hvis dette skjer flere ganger, bør du finne et kjøligere sted for å lade høreapparatet ditt
Én indikator blinker rødt 	Laderen kan ikke gjenkjenne høreapparatet	Ta ut det inkompatible høreapparatet

Lysindikatorer	Mulig årsak	Løsning
	Høreapparatet har en kritisk feil	Ta ut høreapparatet, koble fra strømmen i 10 sekunder og prøv på nytt Hvis laderen fremdeles blinkerrødt, kontakter duhørselsspesialisten
Begge indikatorene blinkerrødt 	Laderen har en kritisk feil	Ta ut høreapparatet, koble fra strømmen i 10 sekunder og prøv på nytt Hvis laderen fremdeles blinker rødt, kontakter du hørsels- spesialisten

INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER

Tiltenkt bruk

WPT202-modellen skal brukes til lading av det/de kompatible høreapparatene.

EU-direktiver

Direktiv 2014/53/EU

WSAUD A/S erklærer herved at WPT202 er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

WPT202 inneholder en radiosender som opererer på: 6,78 MHz, 13,4 dB μ A/m ved 3 m.

En kopi av samsvarserklæringen iht. 2014/53/EU finnes på:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Informasjon om kassering





Ikke kast høreapparater, høreapparattilbehør og ladere sammen med vanlig husholdningsavfall.

Høreapparater, høreapparattilbehør og ladere skal leveres på avfallsstasjoner som er beregnet for elektrisk og elektronisk avfall, eller returneres til hørselsspesialisten.

For retur eller forsendelse av enhetene kan du ta kontakt med hørselsspesialisten.

SYMBOLER

Symboler som vanligvis brukes av WSAUD A/S ved merking av medisinsk utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv.)

Symbol	Tittel/Beskrivelse
	Produsent Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.
	Katalognummer Produktets katalognummer (enhetsnummer).
	Se bruksanvisningen Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advarsler/forholdsregler) og må leses før produktet tas i bruk.
	Advarsel Tekst merket med et advarsel-symbol skal leses før produktet tas i bruk.
	WEEE-symbol "Skal ikke kastes med vanlig avfall." Når et produkt skal kastes, må det leveres inn på en avfallstasjon til resirkulering og gjenvinning for å forhindre risiko for skade på miljøet eller menneskers helse som følge av eventuelle farlige stoffer.

Symbol	Tittel/Beskrivelse
	CE-merke Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking.
	RCM-merke Produktet er i samsvar med EMC-direktivet og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller newzealandske markedet.
	FCC-logo Produktet er i overensstemmelse med relevante USA 47 CFR-regler. FCC – Federal Communications Commission.
	Medisinsk utstyr Angir at enheten er medisinsk utstyr.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к использованию вашего зарядного устройства, внимательно прочтите эту инструкцию.



Храните зарядное устройство в местах, недоступных для детей, домашних животных и лиц с ограниченными умственными способностями.



Никогда не подвергайте зарядное устройство воздействию температуры выше 50 °C (122 °F), длительного солнечного света, открытого пламени или источников возгорания.



Во время зарядки поместите зарядное устройство вертикально на плоскую устойчивую поверхность с достаточным пространством вокруг зарядного устройства. Не накрывайте и не размещайте вблизи легковоспламеняющихся веществ.



Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно открыть или отремонтировать зарядное устройство. При обнаружении дефектов обратитесь к своему аудиологу.



Используйте только зарядное устройство WPT202 для зарядки ваших слуховых аппаратов. Использование зарядного устройства, не рекомендованного WSAUD A/S, может ухудшить работу системы или привести к возникновению опасных ситуаций.



Никогда не оставляйте зарядное устройство под воздействием прямого солнечного света и не погружайте его в воду.



Никогда не вставляйте другие объекты, кроме слуховых аппаратов, в зарядные гнезда.



Адаптер питания должен соответствовать стандартам IEC 60601-1, IEC 62368-1 или эквивалентным стандартам безопасности, применимым в вашем регионе. Всегда используйте входящий в комплект USB-кабель с адаптером питания с разъемом типа USB-A.

ВАШЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Введение

Благодарим вас за выбор этого устройства, которое предназначено для зарядки поддерживаемых слуховых аппаратов.


Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно прочтите эту инструкцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваше зарядное устройство может отличаться от показанного в данной брошюре. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения, если сочтем их необходимыми.

Краткий обзор зарядного устройства

Зарядное устройство имеет зарядное гнездо для каждого слухового аппарата и два световых индикатора, которые показывают состояние зарядки слуховых аппаратов.

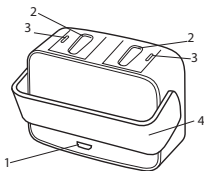

1. Порт микро-USB
2. Зарядные гнезда
3. Световые индикаторы
4. Откидная крышка

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Ваше зарядное устройство предназначено для использования в помещении. Оно чувствительно к экстремальным условиям, таким как высокие температуры, и не должно эксплуатироваться, храниться или транспортироваться под прямыми солнечными лучами.

Рабочие условия для зарядного устройства:

	Мин.	Макс.
Температура	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Влажность	10 % отн. влажности	95 % отн. влажности

Хранение и транспортировка зарядного устройства должны выполняться при следующих условиях:


	Мин.	Макс.
Температура	-20 °C (-4 °F)	50 °C (122 °F)
Влажность	10 % отн. влажности	95 % отн. влажности
Атмосферное давление	750 мбар	1060 мбар

Технические паспорта и дополнительная информация о вашем зарядном устройстве доступны на сайте <https://global.widex.com>.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Подготовка к использованию


Крышка

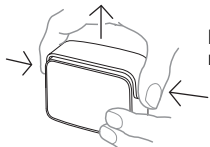

Перед использованием возьмите откидную крышку с обеих сторон и поднимите ее.

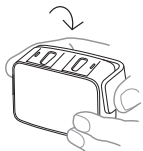


Затем потяните ее к стороне с USB-портом.

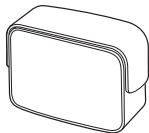


Если вы не используете зарядное устройство, закройте откидную крышку для защиты зарядных гнезд. Просто потяните откидную крышку вверх, чтобы закрыть верхнюю часть, прежде чем прижать ее вниз.

Питание


Вы можете подключить зарядное устройство к различным источникам питания с 5 В пост. тока, мощностью 500 мА:

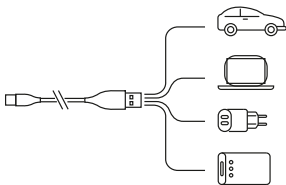

Используйте только USB-кабель, входящий в комплект устройства.

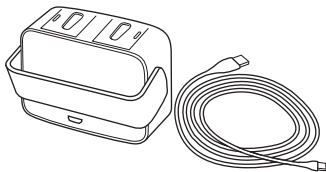

Подключите кабель к зарядному устройству:

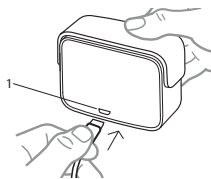

1. Порт микро-USB

Включите питание


При подключении зарядного устройства к блоку питания световые индикаторы **промигают белым 5 раз** и затем выключатся:



Зарядное устройство теперь находится в режиме ожидания и готово к зарядке слухового аппарата.

Зарядка слухового аппарата

Аккуратно поместите слуховой аппарат в зарядное гнездо. Слуховой аппарат выключится автоматически.

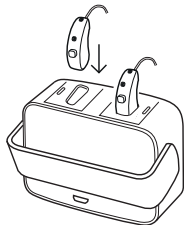

При подключении к электропитанию зарядное устройство может заряжать два слуховых аппарата одновременно; однако каждый слуховой аппарат может заряжаться индивидуально в зависимости от состояния слухового аппарата.


Это означает, что, если один слуховой аппарат полностью заряжен и помещен в зарядное устройство, он не будет заряжаться.

Однако если другой слуховой аппарат *не* заряжен, он будет заряжаться.

Полная зарядка слухового аппарата занимает около 4 часов. Зарядка в течение получаса эквивалентна примерно 4 часам использования.


Индикаторы зарядки

Когда зарядное устройство находится в режиме обнаружения слухового аппарата, световой индикатор становится **однотонно-желтым**:

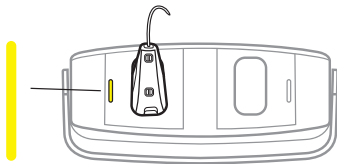


Как только зарядное устройство обнаружит слуховой аппарат, начинается зарядка.


Световой индикатор будет **мигать зеленым**, указывая на то, что слуховой аппарат разряжен и **заряд батареи составляет менее 40 %**:

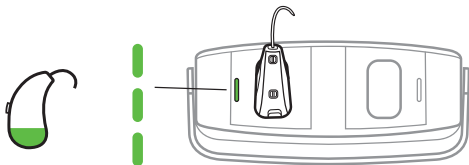

Световой индикатор будет **гореть зеленым**, если слуховой аппарат заряжен более чем на **40 %**:

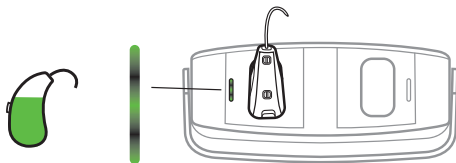

Когда слуховой аппарат будет **заряжен на 100 %**, световой индикатор станет **однотонно-зеленым**:

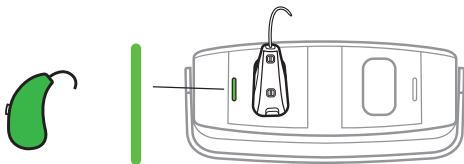

После зарядки

При извлечении слуховых аппаратов из зарядных гнезд не тяните их за звуковод/трубки, так как это может повредить соединение со слуховым аппаратом.

Вместо этого извлекайте слуховой аппарат из гнезда за корпус.




После извлечения слухового аппарата из зарядного устройства он включится через несколько секунд.

Не забудьте выключить его, если вы не собираетесь сразу его использовать.

Сразу после зарядки слуховой аппарат может какое-то время быть теплым.

Если для вас это некомфортно, подождите несколько минут, чтобы слуховой аппарат нагрелся до комнатной температуры, прежде чем его надевать.

Обзор световых индикаторов

Световые индикаторы	Статус
Мигает белым 	Зарядное устройство подключено к источнику питания
Однотонный желтый 	Зарядное устройство обнаруживает слуховой аппарат
Мигает зеленым 	Слуховой аппарат заряжается Низкий заряд батареи, менее 40 %
Светится зеленым 	Слуховой аппарат заряжается Заряд аккумулятора более 40 %
Однотонный зеленый 	Слуховой аппарат полностью заряжен Аккумулятор заряжен на 100 %

Световые индикаторы

Статус

Один индикатор мигает красным



Во время зарядки произошла ошибка, зарядка остановлена
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

Оба индикатора мигают красным



Во время зарядки произошла ошибка, зарядка остановлена
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

Мигает желтым



Во время зарядки температура слухового аппарата стала слишком высокой, зарядка приостановлена
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

ОЧИСТКА

Зарядное устройство обычно не требует очистки. При необходимости аккуратно протрите зарядное устройство мягкой сухой тканью.

Если вы заметили пыль в зарядном гнезде, осторожно продуйте его. Если этого недостаточно, аккуратно очистите зарядное гнездо ватной палочкой.



Чтобы удалить ушную серу из зарядного устройства, тщательно протрите мягкой тканью с небольшим количеством мягкого бытового моющего средства.




Никогда не используйте острые/заостренные предметы для очистки зарядного устройства.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Здесь вы найдете рекомендации для тех случаев, когда ваше зарядное устройство работает ненадлежащим образом.

Световые индикаторы	Возможная причина	Решение
Световые индикаторы не подсвечиваются	Зарядное устройство не подключено	Убедитесь, что USB-кабель подключен к адаптеру питания и включен розетку
Один светодиодный аппарат или оба мигают желтым 	Температура окружающей среды или слухового аппарата превышает критический предел, зарядка приостановлена	Зарядка продолжится, когда температура окружающей среды или слухового аппарата снизится. Если это происходит постоянно, найдите более прохладное место для зарядки слухового аппарата
Один индикатор мигает красным 	Зарядное устройство не может распознать слуховой аппарат	Извлеките несовместимый слуховой аппарат

Световые индикаторы	Возможная причина	Решение
	Слуховой аппарат выдает критическую ошибку	Извлеките слуховой аппарат, отключите от источника питания на 10 секунд, а затем попробуйте еще раз Если зарядное устройство по-прежнему мигает красным, обратитесь к своему аудиологу
Оба индикатора мигают красным 	Зарядное устройство выдает критическую ошибку	Извлеките слуховой аппарат, отключите от источника питания на 10 секунд, а затем попробуйте еще раз Если зарядное устройство по-прежнему мигает красным, обратитесь к своему аудиологу

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение

Модель WPT202 используется для зарядки поддерживаемых слуховых аппаратов.

Директивы ЕС

Директива 2014/53/ЕС

Настоящим WSAUD A/S заявляет, что упомянутое оборудование WPT202 отвечает основным требованиям и прочим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС.

Оборудование WPT202 оснащено радиопередатчиком, работающим на следующих частотах: 6,78 МГц; 13,4 дБмкА/м в диапазоне 3 м.

Копию декларации соответствия требованиям 2014/53/ЕС можно найти на сайте

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Информация по утилизации




Не выбрасывайте слуховые аппараты, их принадлежности и зарядные устройства вместе с бытовыми отходами.

Слуховые аппараты, их принадлежности и зарядные устройства необходимо сдавать для утилизации в специализированные организации, занимающиеся переработкой отходов электронного оборудования. Если такой возможности нет, отдайте их своему специалисту по слуховым аппаратам для утилизации в надлежащем порядке.

Для возврата или отправки устройств, пожалуйста, обратитесь к своему аудиологу.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения, используемые компанией WSAUD A/S для маркировки медицинских приборов (в этикетках, руководствах по эксплуатации и т. п.).

Символ	Название/описание
	Изготовитель Изделие произведено изготовителем, чье наименование и адрес указаны рядом с символом. Если уместно, может также быть указана дата изготовления.
	Номер по каталогу Номер изделия по каталогу (артикул).
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по технике безопасности (предупреждения/меры предосторожности), и перед использованием изделия необходимо ознакомиться с ней.
	Предупреждение Текст, помеченный символом предупреждения, необходимо прочесть до начала эксплуатации изделия.
	Маркировка WEEE «Не утилизировать с бытовыми отходами». По окончании использования изделия его необходимо передать в специализированный пункт сбора для утилизации и переработки во избежание риска причинения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за содержания в нем вредных веществ.

Символ	Название/описание
	<p>Маркировка CE</p> <p>Изделие отвечает требованиям, изложенным в директивах Европейского союза по маркировке CE.</p>
	<p>Маркировка RCM</p> <p>Устройство отвечает требованиям по электрической безопасности, нормативным требованиям по ЭМС и радиоспектрам для изделий, поставляемых на австралийский или новозеландский рынок.</p>
	<p>Логотип FCC</p> <p>Устройство соответствует разделу 47 свода федеральных нормативных актов США.</p> <p>FCC — Федеральная комиссия связи США.</p>
	<p>Медицинское изделие</p> <p>Указание на то, что устройство является медицинским изделием.</p>

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa sidor noggrant innan du börjar använda din laddare.



Håll laddaren och andra små delar borta från barn, husdjur och personer med psykisk funktionsnedsättning.



Utsätt aldrig laddaren för temperaturer över 50 °C (122 °F), långvarigt solljus, öppen eld eller antändningskällor.



Placera laddaren upprätt på en plan, stabil yta och med tillräckligt utrymme omkring laddaren vid laddning. Täck inte över laddaren eller placera den i närheten av brandfarliga ämnen.



Försök aldrig att öppna eller reparera laddaren på egen hand. Kontakta din audionom om du påträffar något fel.



Använd endast en WPT202-laddare med dina hörapparater. Användning av en laddare som inte rekommenderas av WSAUD A/S kan äventyra systemet eller resultera i farliga situationer.



Lämna aldrig laddaren i direkt solljus och sänk inte ner den i vatten.



Sätt aldrig i andra föremål än dina hörapparater i laddningsbrunnarna.



Strömadaptern måste överensstämma med IEC 60601-1, IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder som gäller i din region. Använd alltid den medföljande USB-kabeln med en strömadapter med ett USB-A-uttag.

DIN LADDARE

Välkommen

Tack för att du valde den här produkten, som är avsedd att ladda de hörrapparater som stöds.


Läs dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda enheten.

OBSERVERA

Din laddare kanske inte ser ut exakt så som den visas i den här broschyren. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som vi anser vara nödvändiga.

En överblick över laddaren

Laddaren har en laddningsfördjupning för varje hörrapparat och två ljusindikatorer som visar hörrapparaternas laddningsstatus.

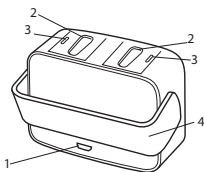

1. Micro USB-port
2. Laddningsfördjupningar
3. Ljusindikatorer
4. Gångat hölje

Användning, förvaring och transport

Laddaren är avsedd för inomhusbruk. Den är känslig för extrema förhållanden, såsom höga temperaturer, och den bör inte användas, förvaras eller transporteras i direkt solljus.

Använd laddaren under följande förhållanden:

	Minimum	Maximum
Temperatur	0° C (32° F)	30° C (86° F)
Luftfuktighet	10 % RH	95 % RH

Förvara och transportera laddaren under följande förhållanden:


	Minimum	Maximum
Temperatur	-20° C (-4° F)	50° C (122° F)
Luftfuktighet	10 % RH	95 % RH
Lufttryck	750 mbar	1060 mbar

Du kan hitta tekniska datablad och mer information om din laddare på <https://global.widex.com>.


ANVÄNDA LADDAREN

Förberedelser för användning


Höljet

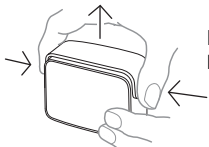

Före användning, ta tag i det gängade höljet på båda sidor och lyft det uppåt.

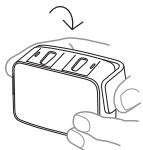


Dra det sedan åt sidan med USB-porten.

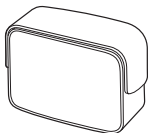


När du inte använder laddaren stänger du det gängade höljet för att skydda laddningsfördjupningarna. Dra helt enkelt det gängade höljet uppåt för att täcka översidan innan du trycker ner det.

Strömförsörjning


Du kan ansluta laddaren till olika strömförsörjningskällor med 5V DC, 500 mA-utmatning:

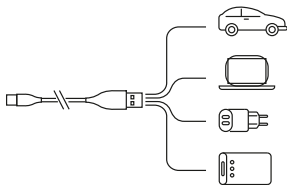

Använd endast den medföljande USB-sladden.

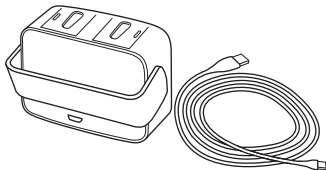

Anslut sladden till laddaren:

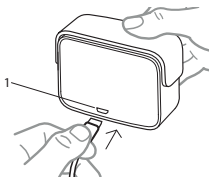

1. Micro USB-port

Slå på


När laddaren är ansluten till strömförsörjningen blinkar ljusindikatorerna med vitt ljus fem gånger och släcks sedan:



Laddaren är nu i standby-läge och redo att ladda din hörapparat.

Att ladda hörapparaten

Placera försiktigt din hörapparat i laddningsfördjupningen. Hörapparaten stängs av automatiskt.

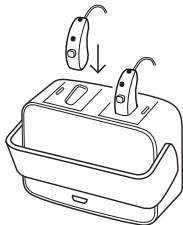

När laddaren är ansluten till strömförsörjning kan den ladda två hörapparater samtidigt, men varje hörapparat kan också laddas individuellt beroende på hörapparatsens tillstånd.


Detta innebär att om en hörapparat är fulladdad och placeras i laddaren kommer den inte att laddas.

Men om den andra hörapparaten *inte* är laddad kommer den att laddas.

Det tar ungefär fyra timmar att ladda upp hörapparaten helt. Om du laddar din hörapparat i en halvtimme kommer du att ha cirka fyra timmars användning.


Laddningsindikatorer

Medan laddaren letar efter hörapparaten lyser ljust indikatorn med ett **fast gult ljus**:

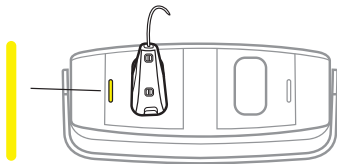


När laddaren har hittat hörapparaten kommer laddningen att påbörjas.


Ljust indikatorn kommer då att **blinka med grönt ljus** för att indikera att hörapparaten har låg batterinivå och har mindre än **40 % laddning**:

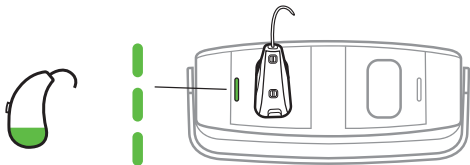

Ljusindikatorn kommer att **lysa med pulserande grönt ljus** för att indikera att hörapparaten har mer än **40 % laddning**:

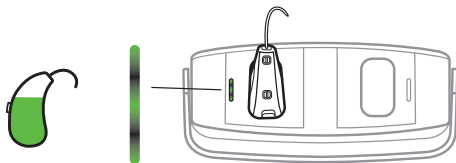

Ljusindikatorn kommer **lysa med ett fast grönt ljus** för att indikera att hörapparaten har **100 % laddning**:

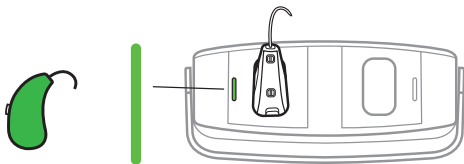

Efter laddning

Dra inte i öronsladden för att ta ut hörapparaterna ur laddningsfördjupningarna, eftersom det kan skada anslutningen till hörapparaten.

Istället placerar du fingrarna runt hörapparaten när du tar ut den ur laddaren.






När du tar ut hörapparaten ur laddaren startar hörapparaten efter några sekunder.

Kom ihåg att stänga av den om du inte ska använda den direkt.

Direkt efter laddning kan hörapparaten tillfälligt kännas varm.

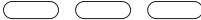Om du inte är bekväm med detta, vänta några minuter tills hörapparaten når rumstemperatur innan du tar på dig den.

Översikt över ljusindikatorer

Ljusindikatorer	Status
Blinkande vitt ljus 	Laddaren är ansluten till strömför- sörjning
Fast gult ljus 	Laddaren letar efter hörapparaten
Blinkande grönt ljus 	Hörapparaten laddas Låg batterinivå, mindre än 40 %
Pulserande grönt ljus 	Hörapparaten laddas Batterinivån är över 40 %
Fast grönt ljus 	Hörapparaten är fulladdad Batterinivån är 100 % laddad

Ljusindikatorer

Status

En indikator blinkar rött



Ett fel har inträffat under laddning och laddningen har stoppats
Se felsökning

Båda indikatorerna blinkar rött



Ett fel har inträffat under laddning och laddningen har stoppats
Se felsökning

Blinkande gult ljus



Hörapparatens temperatur har blivit för hög under laddning och laddningen har pausats
Se felsökning

RENGÖRING

Laddaren kräver normalt sett ingen rengöring. Torka försiktigt av laddaren med en mjuk, torr trasa vid behov.

Blås försiktigt rent om du märker att damm har samlats i laddningsfördjupningarna. Om detta inte är tillräckligt, rengör försiktigt laddningsfördjupningarna med en bomullstopps.



För att ta bort öronvax från laddaren, torka försiktigt med en mjuk trasa med lite mildt rengöringsmedel.




Använd aldrig vassa/spetsiga föremål för att rengöra laddaren.

FELSÖKNING

Dessa sidor innehåller råd för vad du ska göra om din laddare inte fungerar som förväntat.

Ljusindikatorer	Möjlig orsak	Lösning
Inga ljus	Laddaren är inte ansluten	Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till en strömadapter och sedan ansluten till ett vägguttag
	Hörapparaten är inte korrekt placerad i laddaren	Placera hörapparaten korrekt i laddaren
En eller båda ljusindikatorerna blinkar med gult ljus 	Temperaturen i omgivningen eller hörapparaten överskrider en kritisk gräns och laddningen har pausats	Laddningen kommer att fortsätta när temperaturen i omgivningen eller hörapparaten har sjunkit. Om detta sker oftast du försöka hitta en svalare plats att ladda din hörapparat på
En indikator blinkar rött 	Laddaren kan inte hitta hörapparaten	Ta bort den inkompatibla hörapparaten

Ljusindikatorer	Möjlig orsak	Lösning
	Hörapparaten har ett kritiskt fel	Ta bort hörapparaten, koppla ifrån strömmen i 10 sekunder och försök sedan igen Om laddaren fortfarande blinkarrött ska du kontakta dinaudionom
Båda indikatorerna blinkarrött 	Laddaren har ett kritiskt fel	Ta bort hörapparaten, koppla ifrån strömmen i 10 sekunder och försök sedan igen Om laddaren fortfarande blinkar rött ska du kontakta din dinaudionom

INFORMATION GÄLLANDE REGELVERK

Avsedd användning

WPT202-modellen ska användas för att ladda de hörapparater som stöds.

EU-direktiv

Direktiv 2014/53/EU

Härmed intygar WSAUD A/S att WPT202-enheten överensstämmer med grundläggande krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

WPT202-enheten innehåller en radiosändare som sänder på: 6,78 MHz, 13,4 dB μ A/m @ 3 m.

En kopia av vår försäkran om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2014/53/EU finns på

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Information beträffande kassering




Släng inte hörapparater, tillbehör och laddare i det vanliga hushållsavfallet.

Hörapparater, tillbehör och laddare ska slängas på avfallsstationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering.

Kontakta din audionom om du vill returnera eller frakta enheterna.

SYMBOLER

Symboler som ofta används av WSAUD A/S i märkning av medicintekniska produkter (etiketter, bruksanvisningar osv.)

Symbol	Rubrik/beskrivning
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress anges in- till symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet.
	Katalognummer Produktens katalognummer (artikelnummer).
	Se bruksanvisningen Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation (var- ningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används.
	Varning Text som har markerats med en varningssymbol måste läsas in- nan produkten används.
	WEEE-märkning "Får inte kastas i vanligt avfall" När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd insamlingsstation för återvinning och åter- användning för att undvika risk för skador på miljön eller männis- kors hälsa som en följd av de farliga ämnen som den innehåller.

Symbol	Rubrik/beskrivning
	CE-märkning Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven för CE-märkning.
	RCM-märkning Produkten uppfyller elsäkerhetskrav, EMC-direktivets krav och radiospektrumreglerande krav för produkter som levereras till marknaden i Australien eller Nya Zeeland.
	FCC-logotypen Produkten är kompatibel med relevanta USA 47 CFR-regler. FCC – Federal Communications Commission (federala kommunikationskommissionen).
	Medicinteknisk produkt Indikering på att enheten är en medicinteknisk produkt.

FCC AND ISED STATEMENTS

Federal Communications Commission Statement



This device complies with part 15/part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by WSAUD A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

CAN RSS-216/CNR-216

CAN ICES-1/NMB-1

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet equipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements defini es pour un controle environnement. Cet emetteur ne doit pas etre co-localises ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou emetteur.



WSAUD A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
<https://global.widex.com>



Manual no.:
9 514 0596 091 001
Issue:
2021-08

